




ZIEHL - NEELSEN

Modificado para Cryptosporidium

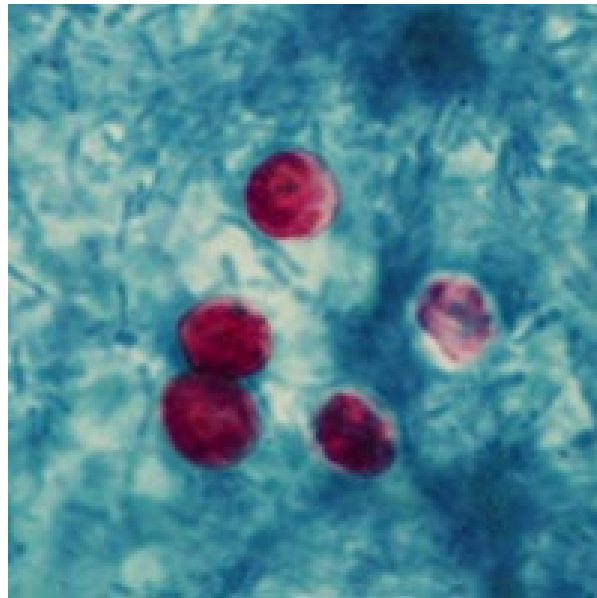

Cryptosporidium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ENSAYOS
04-110803	Ziehl - Neelsen para Cryptosporidium	N.D.



Producto sanitario-diagnóstico in vitro
EMDN: W01030799
IVD en **Clase A**, Reg. UE 2017/746
Basic UDI: 080339762W0104010899D7
UDI-DI: 08033976231125



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica.
Método para evidenciar Cryptosporidium en frotis de material fecal.

PRINCIPIO

El método evidencia las componentes ácido resistentes contenidas en los ooquistes de Cryptosporidium y se caracteriza por la presencia de un agente decolorante menos agresivo que la técnica tradicional para bacilos ácido resistentes.

MÉTODO

- 1) Cubrir el frotis completamente con solución A. Dejar actuar 10 minutos.
- 2) Lavar en agua destilada.
- 3) Solución decolorante. Dejar actuar 10 - 15 segundos.
- 4) Lavar en agua destilada.
- 5) Cubrir el frotis completamente con el reactivo C (verde malaquita solución). Dejar actuar 30 segundos.
- 6) Lavar bien en agua destilada.
- 7) Secar al aire.



Imagen ofrecida con fines ilustrativos

Especificaciones

Especificaciones del método	Tiempo de realización	15 minutos	
	Equipamiento complementario	No requerido	
	Resultados	Ooquistes de <i>Cryptosporidium</i> (diámetro de 4-6 micrones):	Rojo
		Contraste:	Verde pálido
Reactivos	A) Carbofucsina solución	500 ml	
	B) Solución decolorante	2 x 500 ml	
	C) Verde malaquita solución	500 ml	
Conservación	Almacenamiento	Conservar el preparado a temperatura ambiente. Mantener los recipientes bien cerrados.	
	Temperatura de almacenamiento:	15 -25° C	
	Estabilidad	Después de la primera apertura, el reactivo debe considerarse válido y reutilizable hasta la fecha de caducidad indicada, siempre que sea conservado correctamente.	
	Validez	2 años	
Advertencias y precauciones	Clasificación del producto	<p>El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores sanitarios.</p> <p>El producto está clasificado como peligroso.</p> <p>Leer atentamente la información que figura en la etiqueta (símbolos de peligro, frases de riesgo y de seguridad) y consultar siempre la ficha de seguridad. No utilizar si el recipiente primario está dañado.</p> <p>En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano spa y a las autoridades competentes.</p>	
	Eliminación	Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas según las leyes vigentes.	

REVISIÓN N°	MOTIVO	FECHA DE PUBLICACIÓN
001	Conformidad al Reglamento 746 IVDR	16/05/2022

