




ZIEHL - NEELSEN

Til kryptosporidium

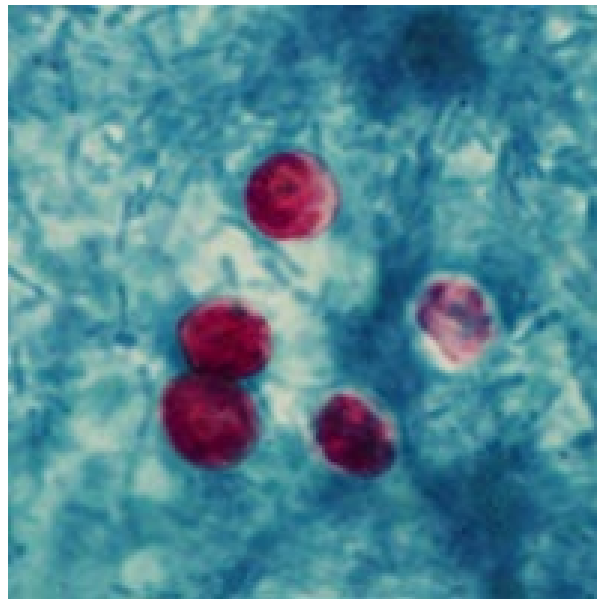

Kryptosporidium

KODE	BESKRIVELSE	TESTNUMMER
04-110803	Ziehl Neelsen til kryptosporidium	NA



In vitro diagnose – medicinsk enhed
EMDN: W01030799
IVD i **klasse A**, reg. UE 2017/746
Basic UDI: 080339762W0104010899D7
UDI-DI: 08033976231125



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.
For at vise kryptosporidium sp. oocyster i afføringsmears.

PRINCIP

Metoden demonstrerer syrefaste komponenter som er til stede i kryptosporidium-oocysterne. Det er kendetegnet ved brug af et svagere affarvningsmiddel end det, der anvendes i traditionel Ziehl-Neelsen farvning.

METODE

- 1) Reagens A i 10 minutter
- 2) Vask i destilleret vand.
- 3) Reagens B i 10-15 sekunder
- 4) Vask i destilleret vand
- 5) Reagens C i 30 sekunder
- 6) Vask i destilleret vand
- 7) Lufttør smearsen



Billedet er kun for illustrative formål

Tekniske oplysninger

Specifikationer for metode	Proceduretid	15 minutter	
	Ekstraudstyr	Ikke anmodet	
	Resultater	Kryptosporidium sp. oocyster (4 - 6 µm diameter):	Rød
		Baggrund:	Bleg grøn
Komponenter	A) Carbofuchsin opløsning	500 ml	
	B) Affarvnings-opløsning	2 x 500 ml	
	C) Malakitgrøn opløsning	500 ml	
Opbevaring	Opbevaring	Opbevar prøven ved rumtemperatur. Hold beholderne tætlukkede.	
	Opbevaringstemperatur	15-25 °C	
	Stabilitet	Efter den første åbning kan produktet genbruges indtil udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt.	
	Gyldighed	2 år	
Advarsel	Produktklassificering	<p>Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle.</p> <p>Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, risiko- og sikkerhedsfraser), og læs altid sikkerhedsdatabladet. Må ikke bruges hvis den primære beholder er beskadiget.</p> <p>I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående informerer Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente myndigheder.</p>	
	Bortskaffelse	Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald.	

REVISION nr.	ÅRSAG	REVISIONSDATO
001	Justering af bestemmelse UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022