




ZIEHLI-NEELSENI VÄRVIMISKOMPLEKT

Cryptosporidium'i jaoks

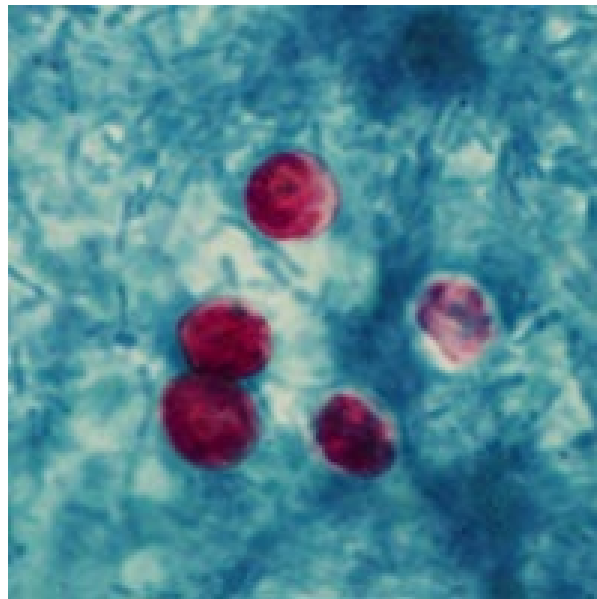

Cryptosporidium

KOOD	KIRJELDUS	ANALÜÜSIDE ARV
04-110803	Ziehli-Neelseni värvimiskomplekt <i>Cryptosporidium</i> 'i jaoks	Puudub

IVD

In Vitro diagnostiline – meditsiiniseade
EMDN: W01030799
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746
Basic UDI: 080339762W0104010899D7
UDI-DI: 08033976231125



Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Toode tsütohistoloogiliste proovide ettevalmistamiseks optilise mikroskoopia jaoks.
Cryptosporidium sp. ootsüütide esiletoomiseks väljaheite äigepreparaatides.

PÕHIMÕTE

Meetod toob esile *Cryptosporidium*'i ootsüütides esinevaid happekindlaid komponente. Selle meetodi puhul kasutatakse nõrgemat värvitustamisainet kui traditsioonilise Ziehli-Neelseni värvimistehnika puhul.

MEETOD

- 1) Reaktiiv A 10 minutiks.
- 2) Peske destilleeritud vees.
- 3) Reaktiiv B 10–15 sekundiks.
- 4) Peske destilleeritud vees.
- 5) Reaktiiv C 30 sekundiks.
- 6) Peske destilleeritud vees.
- 7) Kuivatage äigepreparaat õhu käes.



Pilt on illustratiivse tähendusega

Tehnilised andmed

Meetodi spetsifikatsioonid	Protseduuri kestus	15 minutit	
	Liseseadmed	Pole vajalikud	
	Tulemused	<i>Cryptosporidium sp.</i> ootsüüdid (4–6 µm diameeter):	punane
		Taust:	kahvaturoheline
Koostisosad	A) Karboolfuksiini lahus	500 ml	
	B) Värvitustamise lahus	2 x 500 ml	
	C) Malahhiitroheline lahus	500 ml	
Hoiustamine	Hoiustamine	Hoida valmistist toatemperatuuril. Hoida mahuteid tihedalt suletuna.	
	Hoiustamistemperatuur	15–25 °C	
	Stabiilsus	Pärast esmast avamist on toode korrektse säilitamise korral kasutatav kuni kõlblikkusaja lõpuni.	
	Kõlblikkusaeg	2 aastat	
Hoiatus	Toote klassifikatsioon	Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks. Lugege hoolikalt etiketil olevat teavet (ohusümbolid, riski- ja ohutuslaused) ning tutvuge alati ohutuskaardiga. Ärge kasutage toodet, kui primaarne mahuti on kahjustatud. Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi.	
	Kõrvaldamine	Ohtlik valmistis: järgige seoses jäätmete kõrvaldamisega kõiki riiklikke ja kohalikke keskkonnanäeskirju.	

MUUDATUSE NR	PÕHJUS	MUUDATUSE KUUPÄEV
001	Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine	16/05/2022

