


## **ZIEHL-NEELEN**

### *Cryptosporidiumille*

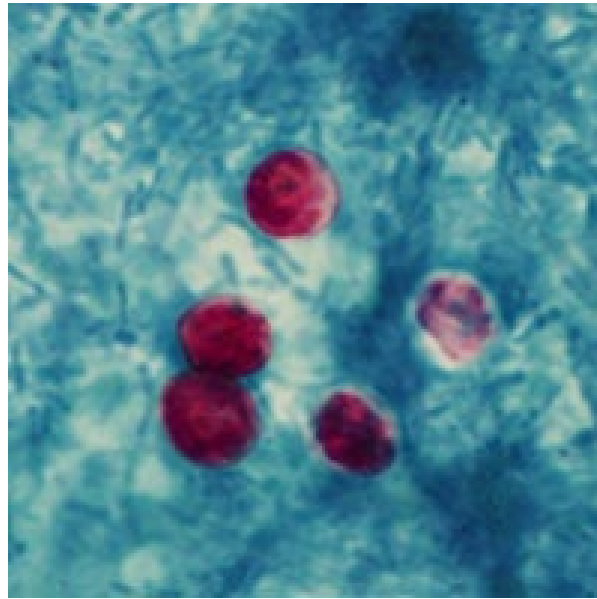

*Cryptosporidium*

KOODI	KUVAUS	TESTIEN LUKUMÄÄRÄ
04-110803	Ziehl Neelsen kryptosporideille	-

**IVD**

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite  
EMDN: W01030799  
IVD, **luokka A**, asetus (EU) 2017/746  
Basic UDI: 080339762W0104010899D7  
UDI-DI: 08033976231125



Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Tuote sytöhistologisten näytteiden valmisteluun optista mikroskopiaa varten. Cryptosporidium-lajien ookystien osoittamiseen ulostenäytteissä.

### TOIMINTAPERIAATE

Menetelmä osoittaa Cryptosporidium-lajien ookystissa olevat haponkestävät komponentit. Menetelmässä käytetään miedompaa värinpoistoainetta kuin perinteisessä Ziehl-Neelsenin värjäyksessä.

### MENETELMÄ

- 1) Reagenssi A 10 minuuttia
- 2) Pese tislattulla vedellä.
- 3) Reagenssi B 10–15 sekuntia
- 4) Pese tislattulla vedellä
- 5) Reagenssi C 30 sekuntia
- 6) Pese tislattulla vedellä
- 7) Anna sivelynäytteen kuivua



*Kuva on havainnollistava*

## Tekniset tiedot

Menetelmän tiedot	Toimenpiteen kesto	15 minuuttia		
	Lisävarusteet	Ei tarvita		
	Tulokset	Cryptosporidium-lajien (halkaisija 4–6 µm):	ookystat	Punainen
		Tausta:	Vaaleanvihreä	
Ainesosat	A) Karbolifuksiiniliuos	500 ml		
	B) Väriinpoistoliuos	2 x 500 ml		
	C) Malakiittivihreäliuos	500 ml		
Säilytys	Säilytys	Säilytä valmiste huoneenlämmössä. Pidä astiat tiiviisti suljettuina.		
	Säilytyslämpötila	15–25 °C		
	Stabiliteetti	Avattua tuotetta voidaan käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka, jos sitä säilytetään oikein.		
	Säilyvyysaika	2 vuotta		
Varoitus	Tuotteen luokitus	Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Lue huolellisesti pakkausmerkinnät (vaarasymbolit, riski- ja turvalausekkeet) ja tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteeseen. Älä käytä tuotetta, jos primaaripakkaus on vaurioitunut. Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin.		
	Hävittäminen	Vaarallinen valmiste: noudata kaikkia jätteiden hävittämistä koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä.		

VERSION NRO	SYY	MUOKKAUKSEN PVM
001	Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti	16.5.2022