




ZIEHL - NEELSEN

Za Cryptosporidium

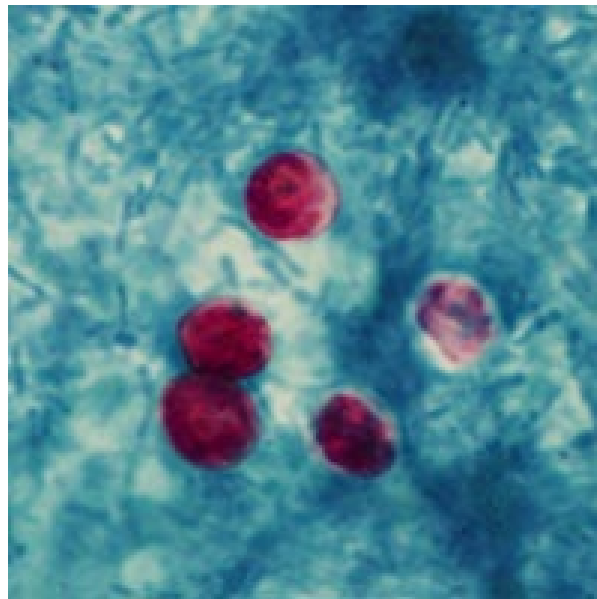

Cryptosporidium

| ŠIFRA | OPIS | BROJ TESTOVA |
|-----------|----------------------------------|--------------|
| 04-110803 | Ziehl Neelsen za Cryptosporidium | N.D. |

IVD

In vitro dijagnostika – medicinski proizvod
EMDN: W01030799
IVD u klasi A, Ur. (EU) 2017/746
Basic UDI: 080339762W0104010899D7
UDI-DI: 08033976231125



Proizvođač: Bio-Optica Milano S.p.A.

Proizvod za pripremu citohistoloških uzoraka za optičku mikroskopiju.
Za prikaz oocista *Cryptosporidium* sp. u fekalnim brisevima.

NAČELO

Metoda prikazuje komponente otporne na kiselinu prisutne u oocistama *Cryptosporidium*. Svojevrsna joj je upotreba manje agresivnog sredstva za koloriranje od onog koje se koristi u tradicionalnom Ziehl-Neelsen bojenju.

METODA

- 1) Reagens A na 10 sekundi
- 2) Oprati u destiliranoj vodi.
- 3) Reagens B na 10 – 15 sekundi
- 4) Oprati u destiliranoj vodi
- 5) Reagens C na 30 sekundi
- 6) Oprati u destiliranoj vodi
- 7) Bris osušiti na zraku



Slika služi samo u ilustrativne svrhe

Tehničke pojedinosti

| | | | |
|----------------------|------------------------------|--|----------------|
| Specifikacije metode | Vrijeme postupka | 15 minute | |
| | Komplementarna oprema | Nije zatražena | |
| | Rezultati | Oociste Cryptosporidium sp. (promjera 4 - 6 µm): | Crvena |
| | | Pozadina: | Blijedo zelena |
| Komponente | A) Otopina karbol fuksina | 500 ml | |
| | B) Otopina za dekolorizaciju | 2 x 500 ml | |
| | C) Malahitno zelena otopina | 500 ml | |
| Čuvanje | Čuvanje | Pripravak čuvati na sobnoj temperaturi. Spremnike držati dobro zatvorenima. | |
| | Temperatura skladištenja | 15-25°C | |
| | Stabilnost | Nakon prvog otvaranja, proizvod je moguće ponovno upotrijebiti do datuma isteka, ako je pravilno skladišten. | |
| | Valjanost | 2 godine | |
| Upozorenje | Klasifikacija proizvoda | Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu. Pažljivo pročitati informacije na naljepnici (simbole opasnosti, oznake upozorenja i obavijesti) i uvijek pogledati sigurnosno-tehnički list. Ne koristiti ga ako je primarni spremnik oštećen. U slučaju ozbiljnog incidenta, preporučujemo da odmah informirate tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela. | |
| | Odlaganje | Opasan otpad: poslove njegovog zbrinjavanja povjeriti specijaliziranim i ovlaštenim tvrtkama, u skladu s važećim zakonskim propisima. | |

| IZMJENA br. | RAZLOG | DATUM IZMJENE |
|-------------|--|---------------|
| 001 | Prilagodba uredbe (EU) 2017/746 - IVDR | 16.05.2022. |