




ZIEHL - NEELSEN

Paredzēts Cryptosporidium

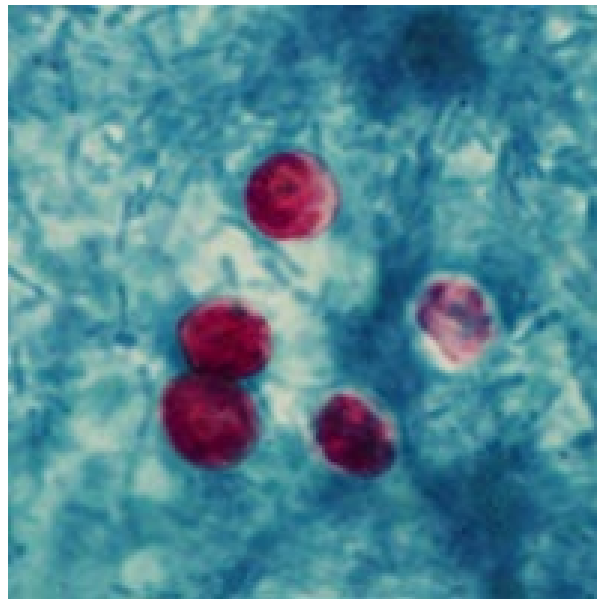

Cryptosporidium

KODS	APRAKSTS	TESTU SKAITS
04-110803	Ziehl Neelsen, paredzēts Cryptosporidium	Nav piemērojams



In vitro diagnostikas medicīnas ierīce
EMDN: W01030799
IVD **A klasē**, Reg. (ES) 2017/746
Basic UDI: 080339762W0104010899D7
UDI-DI: 08033976231125



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.
Cryptosporidium sp. oocistu attēlošanai fēču uztriepēs.

PRINCIPS

Ar metodes palīdzību attēlo skābju noturīgas sastāvdaļas, kas ir klātesošas Cryptosporidium oocistās. Tajā tiek izmantota atkrāsošanas viela, kas ir vājāka par to, kas tiek izmantota tradicionālajā Ziehl-Neelsen krāsvielā.

METODE

- 1) Reaģents A uz 10 minūtēm
- 2) Mazgājiet destilētā ūdenī.
- 3) Reaģents B uz 10–15 sekundēm
- 4) Mazgājiet destilētā ūdenī.
- 5) Reaģents C uz 30 sekundēm
- 6) Mazgājiet destilētā ūdenī.
- 7) Nožāvējiet uztriepi dabiskā veidā



Attēls ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem

Tehniska informācija

Metodes specififikācijas	Procedūras laiks	15 minūtes	
	Papildaprīkojums	Nav nepieciešams	
	Rezultāti	Cryptosporidium sp. oocistas (4–6 μm diametrā):	sarkanā krāsā
Fons:		bāli zaļā krāsā	
Sastāvdaļas	A) Karbolfuksīna šķīdums	500 ml	
	B) Atkrāsošanas šķīdums	2 x 500 ml	
	C) Malahīta zaļš šķīdums	500 ml	
Glabāšana	Glabāšana	Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši noslēgtas.	
	Glabāšanas temperatūra	15–25°C	
	Stabilitāte	Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā.	
	Derīgums	2 gadi	
Brīdinājums	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.	
	Iznīcināšana	Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu.	

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16.05.2022.

