




ZIEHL - NEELSEN

Pentru Cryptosporidium

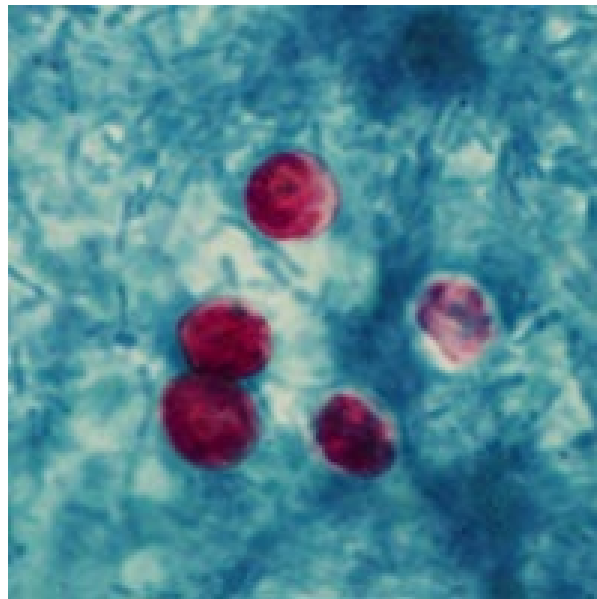

Cryptosporidium

COD	DESCRIERE	NUMĂR TESTE
04-110803	Ziehl Neelsen pentru Cryptosporidium	N/A

IVD

Diagnosticare in vitro - dispozitiv medical

EMDN: W01030799

IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din **Clasa A**, Reg. UE 2017/746

Basic UDI: 080339762W0104010899D7

UDI-DI: 08033976231125



Producător: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.
Pentru a evidenția oochisturile de *Cryptosporidium* sp. în frotiuri de fecale.

PRINCIPIUL

Metoda demonstrează componentele rezistente la acid prezente în oochisturile de *Cryptosporidium*. Se caracterizează prin utilizarea unui agent de decolorare mai slab decât cel utilizat în colorația Ziehl-Neelsen tradițională.

METODA

- 1) Reactiv A pentru 10 minute
- 2) Spălați în apă distilată.
- 3) Reactiv B pentru 10-15 secunde
- 4) Spălați în apă distilată.
- 5) Reactiv C pentru 30 de secunde
- 6) Spălați în apă distilată.
- 7) Uscăți frotiul la aer.



Imaginea are numai scop ilustrativ.

Detalii tehnice

Specificațiile metodei	Durata procedurii	15 minute	
	Echipament complementar	Nu este necesar	
	Rezultate	Oochisturi de <i>Cryptosporidium</i> sp. (4 - 6 μm diametru):	Roșu
Fundal:		Verde pal	
Componente	A) Soluție de carbofucsină	500 ml	
	B) Soluție decolorantă	2 x 500 ml	
	C) Soluție de verde malachit	500 ml	
Depozitare	Depozitare	Depozitați preparatul la temperatura camerei. Păstrați recipientele închise ermetic.	
	Temperatura de depozitare	15-25 °C	
	Stabilitate	După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data de expirare, dacă este depozitat corect.	
	Valabilitate	2 ani	
Avertizare	Clasificarea produsului	<p>Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical în laboratoare profesionale.</p> <p>Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar este deteriorat.</p> <p>În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente.</p>	
	Eliminarea	Preparat periculos: respectați toate reglementările de mediu, de stat și locale, privind eliminarea deșeurilor.	

REVIZUIREA nr.	MOTIV	DATA REVIZUIRII
001	Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022