




ZIEHL - NEELSEN

Na kokcie rod *Cryptosporidium*

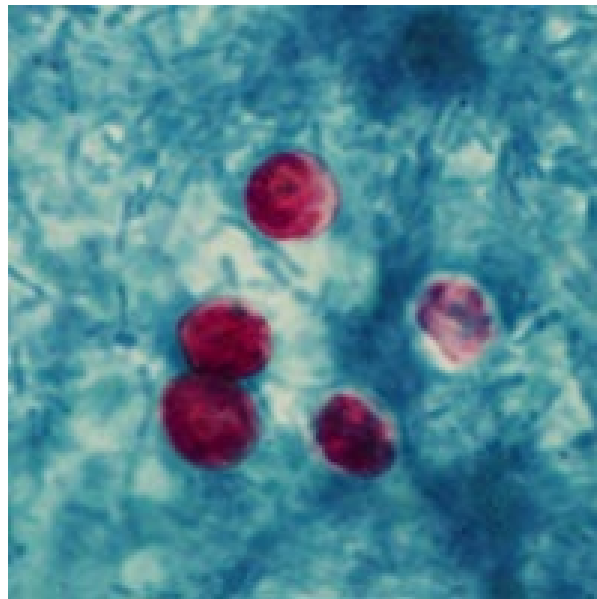

Cryptosporidium

KÓD	OPIS	POČET TESTOV
04-110803	Ziehl Neelsen na <i>Cryptosporidium</i>	Neuplatňuje sa.

IVD

Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
EMDN: W01030799
IVD, **trieda A**, nariadenie (EÚ) 2017/746
Basic UDI: 080339762W0104010899D7
UDI-DI: 08033976231125



Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.
Zobrazovanie oocýst Cryptosporidium sp. vo fekálnych steroch.

PRINCÍP FUNGOVANIA

Metóda preukazuje zložky odolné voči kyselinám prítomné v oocystách Cryptosporidium. Vyznačuje sa použitím slabšieho odfarbovacieho činidla, než sa používa pri tradičnom Ziehl-Neelsenovom farbení.

METÓDA

- 1) Činidlo A po dobu 10 minút
- 2) Premyte v destilovanej vode.
- 3) Činidlo B po dobu 10–15 sekúnd
- 4) Premyte v destilovanej vode.
- 5) Činidlo C po dobu 30 sekúnd
- 6) Premyte v destilovanej vode.
- 7) Vysušte ster na vzduchu.



Obrázok má len informatívny charakter

Technické podrobnosti

Špecifikácie metódy	Doba trvania postupu	15 minút		
	Doplnkové vybavenie	Nepožaduje sa		
	Výsledky	Oocysty <i>Cryptosporidium</i> sp. (priemer 4–6 µm):	Červená	
		Pozadie:	Bledo zelená	
Zložky	A) Roztok karbol-fuchsínu	500 ml		
	B) Odfarbovací roztok	2 x 500 ml		
	C) Roztok malachitovej zelene	500 ml		
Skladovanie	Skladovanie	Pripravený preparát uchovávať pri izbovej teplote. Nádoby uchovávať tesne uzavreté.		
	Teplota skladovania	15–25 °C		
	Stabilita	Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do dátumu expirácie za predpokladu jeho správneho uchovania.		
	Trvanlivosť	2 roky		
Varovanie	Klasifikácia produktu	<p>Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych pracovníkov.</p> <p>Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov.</p> <p>Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal.</p> <p>V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady.</p>		
	Likvidácia	Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov.		

Č. REVÍZIE	DŮVOD	DÁTUM REVÍZIE
001	Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR	16. 5. 2022