




ZIEHL - NEELSEN

För Cryptosporidium

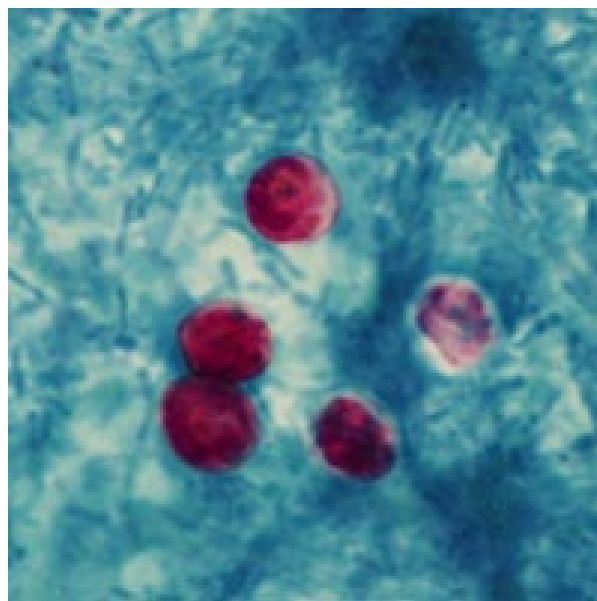

Cryptosporidium

KOD	BESKRIVNING	ANTAL TESTER
04-110803	Ziehl Neelsen för Cryptosporidium	N.A.



Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet
EMDN: W01030799
IVD i **Klass A**, Förord. UE 2017/746
Basic UDI: 080339762W0104010899D7
UDI-DI: 08033976231125



Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produkt för beredning av cytohistologiska prover för optisk mikroskopi.
För att visa *Cryptosporidium* sp. oocystor i fekala utstryk.

PRINCIP

Metoden visar syrafasta komponenter närvarande i *Cryptosporidium* oocystor. Den kännetecknas av att den använder ett svagare avfärgningsmedel än det som används i traditionell färgning enligt Ziehl-Neelsen.

METOD

- 1) Reagens A i 10 minuter.
- 2) Tvätta i destillerat vatten.
- 3) Reagens B i 10-15 sekunder.
- 4) Tvätta i destillerat vatten.
- 5) Reagens C i 30 sekunder.
- 6) Tvätta i destillerat vatten.
- 7) Lufttorka utstryket.



Bilden är endast för illustrativa ändamål.

Tekniska detaljer

Metodspecifikationer	Procedurtid	15 minuter	
	Kompletterande utrustning	Ej erforderlig	
	Resultat	Cryptosporidium sp. oocystor (4-6 µm diameter):	Röda
		Bakgrund:	Blekgrön
Komponenter	A) Karbolfuksinlösning	500 ml	
	B) Avfärgningslösning	2 x 500 ml	
	C) Malakitgrön lösning	500 ml	
Förvaring	Förvaring	Förvara preparatet vid rumstemperatur. Håll behållare tätt förslutna.	
	Förvaringstemperatur	15-25 °C	
	Stabilitet	Efter första öppning kan produkten återanvändas fram till utgångsdatumet, vid korrekt förvaring.	
	Validitet	2 år	
Varning	Produktklassificering	<p>Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. Läs noga informationen på etiketten (färosymboler, risk- och säkerhetsfraser) och konsultera alltid säkerhetsdatabladet. Använd inte produkten om den primära behållaren är skadad. I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter.</p>	
	Kassering	Farligt preparat: följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.	

REVISIONSNUMMER	ORSAK	REVISIONSDATUM
001	Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022