





AMYLÁZA

Pro enzymatickou digesci

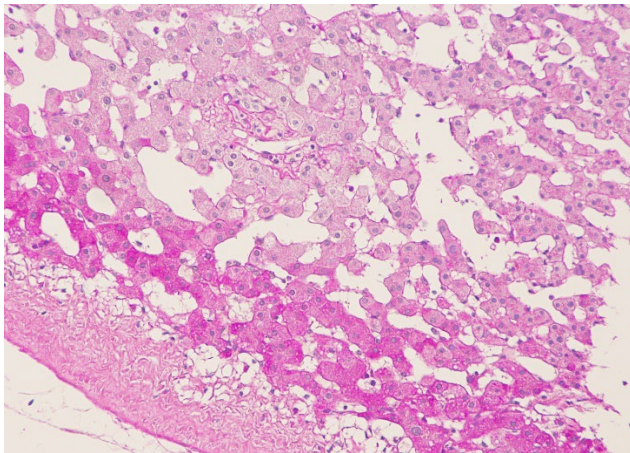

Játra s glykogenem

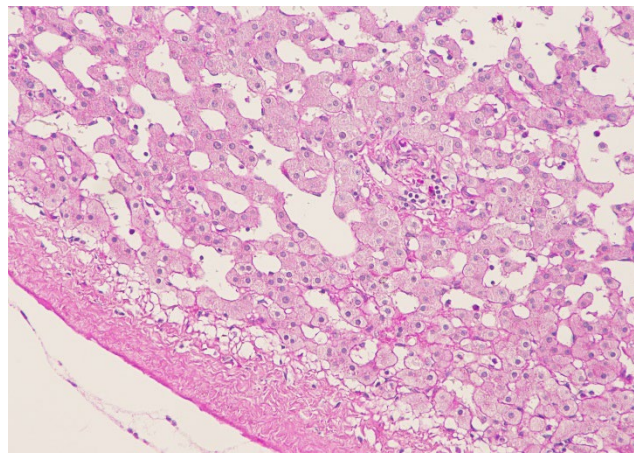

Játra po enzymatické digesci

KÓD	POPIS	POČET TESTŮ
04-140808	Amyláza	100 testů



Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
IVD, **třída A**, nařízení (EU) 2017/746
UDI-DI: 08033976230692
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produkt pro přípravu cytohistologických vzorků pro optickou mikroskopii.

Odstranění glykogenu z tkáňových řezů:

- Játra, řezy zalité v parafínu: odstranění glykogenu se doporučuje k pozorování pouze epitelových neutrálních mucinů. Tato metoda se doporučuje pro biopsii jater.
- Zmrazený řez svalu

METODA

- 1) Vložte řezy do destilované vody.
- 2) Nechejte roztok amylázy vytemperovat na pokojovou teplotu.
- 3) Překryjte řezy roztokem amylázy: inkubujte po dobu 10 minut při pokojové teplotě.
- 4) Několikrát propláchněte sklíčko v destilované vodě.
- 5) Nabarvěte pomocí reakce P.A.S.

Technické podrobnosti

Specifikace metody	Doba trvání postupu	10 minut
	Doplňkové vybavení	Nepožaduje se
	Výsledky	Po reakci PAS je viditelné odstranění glykogenu při srovnání řezu vzorku se sousedním řezem ze stejného přípravku neošetřeného amylázou.
Činidla	Amyláza z Bacillus subtilis A v pufovaném roztoku pH 7,3	30 ml
Skladování	Skladování	Preparát uchovávejte při teplotě 2–8 °C. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené.
	Teplota skladování	2–8 °C
	Stabilita	Po prvním otevření lze produkt používat opakovaně až do data expirace za podmínky správného uchování.
	Trvanlivost	1 rok
Varování	Klasifikace produktu	Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné zdravotnické pracovníky. Pečlivě si přečtěte informace na štítku (symboly nebezpečí, R-věty a S-věty) a vždy se seznamte s informacemi v bezpečnostním listu. Nepoužívejte, pokud je poškozený primární obal. V případě závažné nehody doporučujeme, abyste okamžitě informovali společnost Bio-Optica Milano S.p.A a příslušné úřady.
	Likvidace	Nebezpečný preparát: dodržujte všechny národní a místní předpisy týkající se likvidace odpadů.

Č. REVIZE	DŮVOD	DATUM REVIZE
001	Novelizace nařízení (EU) 2017/746 – IVDR	16/05/2022