



AMYLAASI

Entsyaattinen pilkkoutuminen

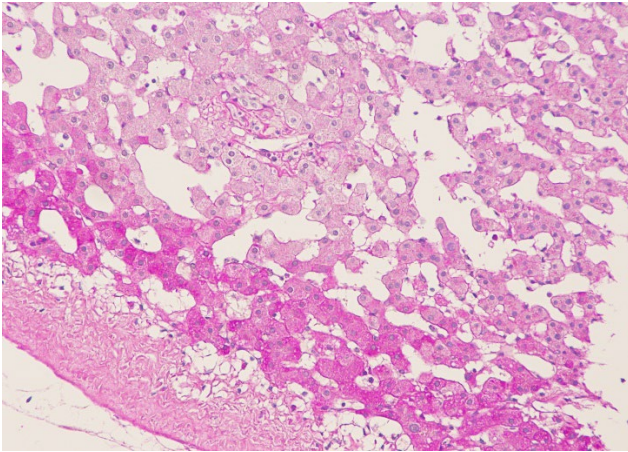

Maksa, jossa glykogeeniä

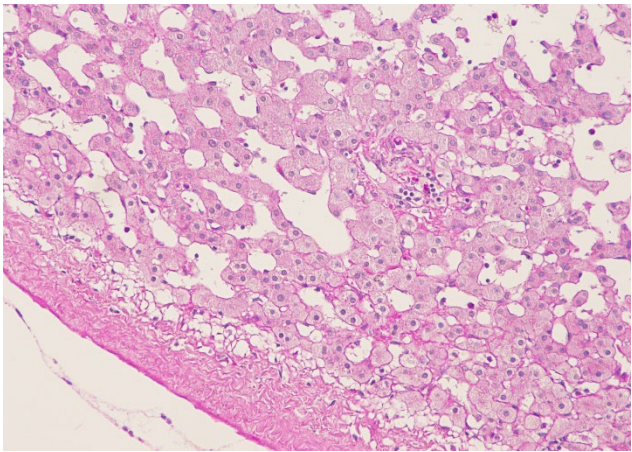

Maksa entsyaattisen pilkkoutumisen

jälkeen

KOODI	KUVAUS	TESTIEN LUKUMÄÄRÄ
04-140808	Amylaasi	100 testiä

IVD

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite
IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746
UDI-DI: 08033976230692
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Tuote sytologistien näytteiden valmisteluun optista mikroskopiaa varten.

Glykokeenin poisto kudosleikkeistä:

- Maksa, parafiiniin valetut leikkeet: glykokeenin poisto on suositeltavaa, jotta voidaan tarkastella vain epiteliaalisia neutraaleja musiineja. Tätä menetelmää suositellaan maksabiopsiaan.
- Lihaksen jääleike.

MENETELMÄ

- 1) Aseta leikkeet tislattuun veteen.
- 2) Anna amylaasiliuoksen lämmitä huoneenlämpöiseksi.
- 3) Peitä leikkeet amylaasiliuoksella. Inkuboi 10 minuuttia huoneenlämmössä.
- 4) Huuhtelee aluslasi monta kertaa tislattulla vedellä.
- 5) Värjää PAS-reaktiolla.

Tekniset tiedot

Menetelmän tiedot	Toimenpiteen kesto	10 minuuttia
	Lisävarusteet	Ei tarvita
	Tulokset	PAS-reaktion jälkeen glykokeenin poisto näkyy, kun näyteleikettä verrataan saman preparaatin viereiseen leikkeeseen, jota ei ole käsitelty amylaasilla.
Reagenssit	Amylaasi Bacillus subtilis A:sta puskuroidussa liuoksessa, pH 7,3	30 ml
Säilytys	Säilytys	Säilytä valmiste 2–8 °C:n lämpötilassa. Pidä astiat tiiviisti suljettuina.
	Säilytyslämpötila	2–8 °C
	Stabiliteetti	Avattua tuotetta voidaan käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka, jos sitä säilytetään oikein.
	Säilyvyysaika	1 vuosi
Varoitukset	Tuotteen luokitus	Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Lue huolellisesti pakkausmerkinnät (vaarasymbolit, riski- ja turvalausekkeet) ja tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteeseen. Älä käytä tuotetta, jos primaaripakkaus on vaurioitunut. Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin.
	Hävittäminen	Vaarallinen valmiste: noudata kaikkia jätteiden hävittämistä koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä.

VERSION NRO	SY	MUOKKAUKSEN PVM
001	Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti	16/05/2022