





AMILAZA

Za enzimsku digestiju

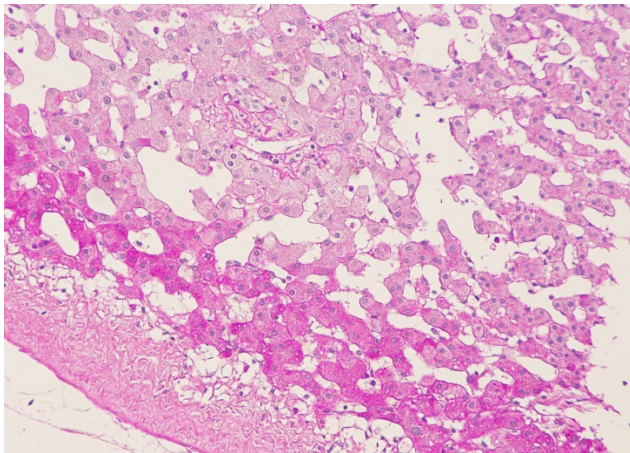

Jeترا s glikogenom

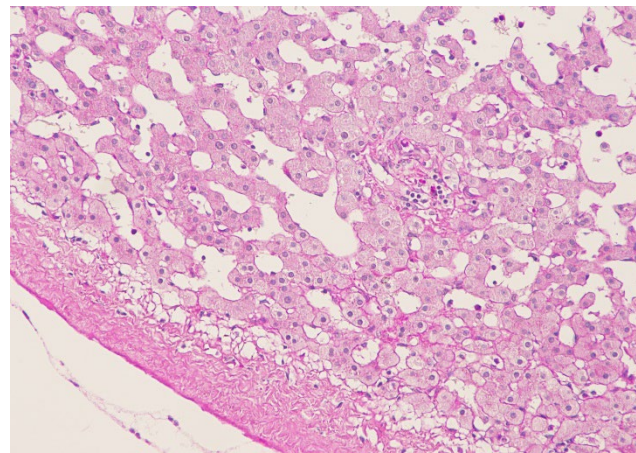

Jeترا nakon enzimske digestije

ŠIFRA	OPIS	BROJ TESTOVA
04-140808	Amilaza	100 testova



In vitro dijagnostika – medicinski proizvod
IVD u **klasi A**, Ur. (EU) 2017/746
UDI-DI: 08033976230692
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Proizvođač: Bio-Optica Milano S.p.A.

Proizvod za pripremu citohistoloških uzoraka za optičku mikroskopiju.

Uklanjanje glikogena iz sekcija tkiva:

- Jetreno tkivo, sekcije uklopljene u parafin: preporučuje se uklanjanje glikogena kako bi se promatrali samo neutralni epitelni mucini. Ova metoda preporučuje se za biopsiju jetre.
- Smrznuta sekcija mišića.

METODA

- 1) Sekcije staviti u destiliranu vodu.
- 2) Otopinu amilaze staviti na sobnu temperaturu.
- 3) Sekcije pokriti otopinom amilaze: inkubirati 10 minuta na sobnoj temperaturi.
- 4) Stakalce isprati u destiliranoj vodi nekoliko puta.
- 5) Boja s P.A.S. reakcijom.

Tehničke pojedinosti

Specifikacije metode	Vrijeme postupka	10 minuta
	Komplementarna oprema	Nije zatražena
	Rezultati	Nakon PAS reakcije, uklanjanje glikogena vidljivo je pri usporedbi sekcije uzorka sa susjednom sekcijom iz istog pripravka koji nije tretiran amilazom.
Reagensi	Amilaza iz bakterije bacillus subtilis A u puferiranoj otopini pH vrijednosti 7,3	30 ml
Čuvanje	Čuvanje	Pripravak čuvati na temperaturi od 2 - 8°C. Dobro zatvoriti spremnike.
	Temperatura skladištenja	2 - 8°C
	Stabilnost	Nakon prvog otvaranja, proizvod je moguće ponovno upotrijebiti do datuma isteka, ako je pravilno skladišten.
	Valjanost	1 godina
Upozorenje	Klasifikacija proizvoda	Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu. Pažljivo pročitati informacije na naljepnici (simbole opasnosti, oznake upozorenja i obavijesti) i uvijek pogledati sigurnosno-tehnički list. Ne koristiti ga ako je primarni spremnik oštećen. U slučaju ozbiljnog incidenta, preporučujemo da odmah informirate tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela.
	Odlaganje	Opasan otpad: poslove njegovog zbrinjavanja povjeriti specijaliziranim i ovlaštenim tvrtkama, u skladu s važećim zakonskim propisima.

IZMJENA br.	RAZLOG	DATUM IZMJENE
001	Prilagodba uredbe (EU) 2017/746 - IVDR	16/05/2022