



# AMILĀZE

*Fermentatīvai hidrolīzei*

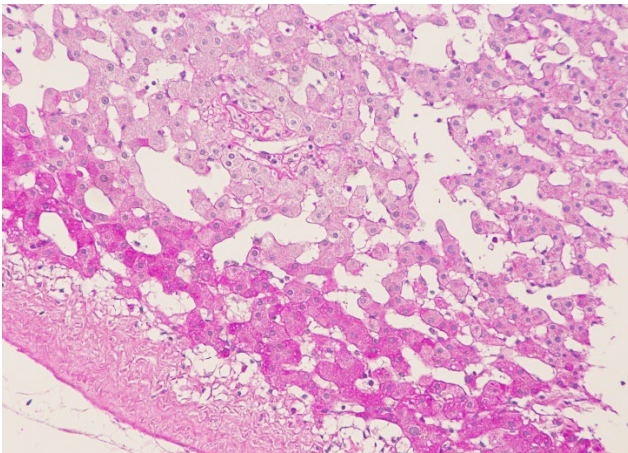

*Aknas ar glikogēnu*

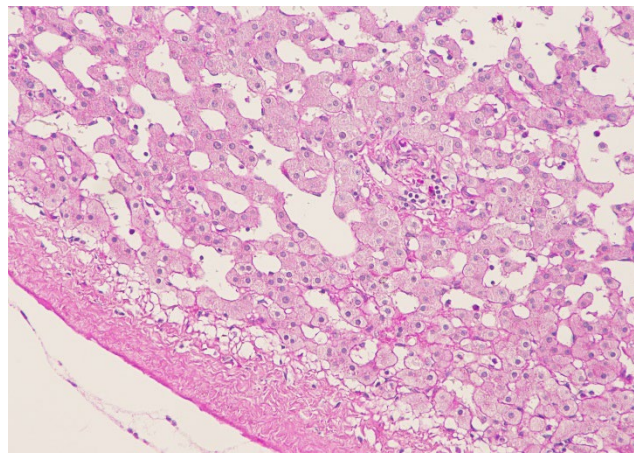

*Aknas pēc fermentatīvas hidrolīzes*

KODS	APRAKSTS	TESTU SKAITS
04-140808	Amilāze	100 testu

**IVD**

In vitro diagnostikas medicīnas ierīce  
IVD **A klasē**, Reg. (ES) 2017/746  
UDI-DI: 08033976230692  
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.

Glikogēna noņemšana no audu sekcijām:

- aknas, parafinā iegultas sekcijas: glikogēna noņemšana ir ieteicama, lai novērotu tikai epitēlija neitrālus mucīnus. Šī metode ir ieteicama aknu biopsijā.
- sasaldētas muskuļu sekcijas.

### METODE

- 1) Ievietojiet sekcijas destilētā ūdenī.
- 2) Ļaujiet amilāzes šķīdumam sasniegt istabas temperatūru.
- 3) Pārklājiet sekcijas ar amilāzes šķīdumu: inkubējiet 10 minūtes istabas temperatūrā.
- 4) Vairākas reizes noskalojiet priekšmetstikliņu destilētā ūdenī.
- 5) Krāsojiet ar P.A.S. reakciju.

### Tehniska informācija

Metodes specifikācijas	Procedūras laiks	10 minūtes
	Papildaprīkojums	Nav nepieciešams
	Rezultāti	Pēc PAS reakcijas glikogēna noņemšana ir redzama, salīdzinot parauga sekciju ar tā paša preparāta blakus esošo sekciju, kas nav apstrādāta ar amilāzi.
Reaģenti	Amilāze no Bacillus subtilis A buferšķīdumā, pH 7,3	30 ml
Glabāšana	Glabāšana	Glabājiet preparātu 2–8°C temperatūrā. Tvertnēm jābūt cieši noslēgtām.
	Glabāšanas temperatūra	2–8°C
	Stabilitāte	Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā.
	Derīgums	1 gads
Brīdinājums	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem. Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja ir bojāts pirmējais iepakojums. Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.
	Iznīcināšana	Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr.	IEMESLS	PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
001	Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR	16/05/2022