



# AMYLASE

*Voor enzymatische afbraak*

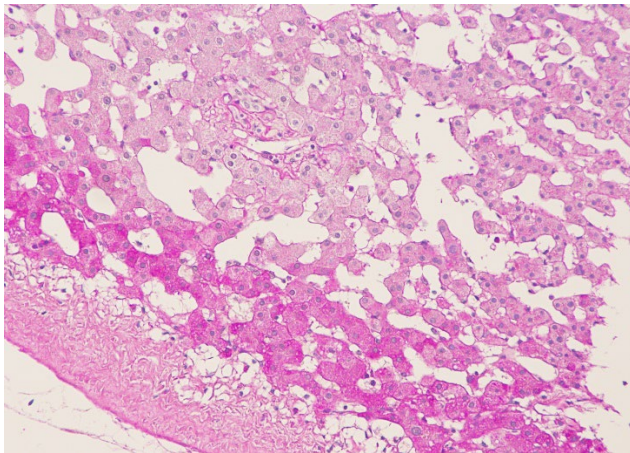

Lever met glycogeen

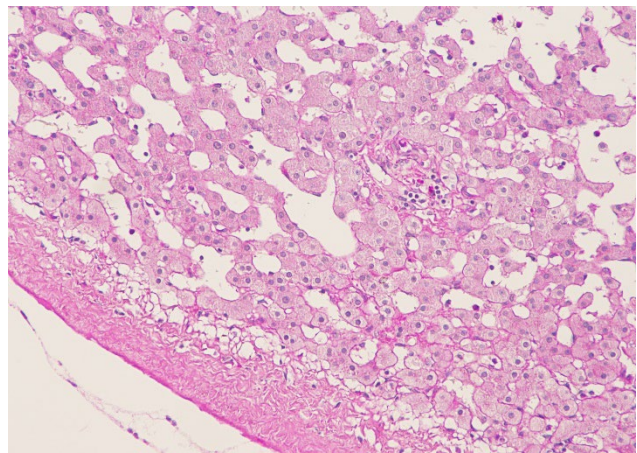

Lever na enzymatische afbraak

CODE	BESCHRIJVING	AANTAL TESTS
04-140808	Amylase	100 tests



In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel  
IVD in **klasse A**, verord. (EU) 2017/746  
UDI-DI: 08033976230692  
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A.

Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.

Verwijdering van glycogeen uit weefselcoupes:

- Lever, in paraffine ingebedde coupes: het verwijderen van glycogeen is raadzaam om alleen epitheliale neutrale mucines te observeren. Deze methode wordt aanbevolen voor leverbiopsie.
- Vriescoupes van spierweefsel

### METHODE

- 1) Coupes in gedistilleerd water brengen.
- 2) De amylaseoplossing op kamertemperatuur brengen.
- 3) Coupes bedekken met amylaseoplossing: 10 minuten incuberen bij kamertemperatuur
- 4) Het glaasje verschillende keren spoelen in gedistilleerd water.
- 5) Kleuren met PAS-reactie.

### Technische details

Methodespecificaties	Duur procedure	10 minuten
	Aanvullende hulpmiddelen	Niet nodig
	Resultaten	Na de PAS-reactie is de verwijdering van glycogeen zichtbaar door de monstercoupe te vergelijken met een aangrenzende coupe van hetzelfde preparaat, dat niet met amylase is behandeld.
Reagentia	Amylase uit Bacillus subtilis A in gebufferde oplossing pH 7,3	30 ml
Opslag	Opslag	Het preparaat bewaren bij 2-8 °C. De houders goed gesloten houden.
	Opslagtemperatuur	2 - 8°C
	Stabiliteit	Na de eerste opening kan het product opnieuw worden gebruikt tot de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt bewaard.
	Geldigheid	1 jaar
Waarschuwing	Productclassificatie	Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de gezondheidszorg. Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire verpakking beschadigd is. Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen.
	Verwijdering	Gevaarlijk preparaat: neem alle nationale en lokale milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

REVISIE nr.	REDEN	REVISIEDATUM
001	Gewijzigde verordening (EU) 2017/746 - IVDR	16/05/2022