



# AMILAZĂ

*Pentru digestia enzimatică*

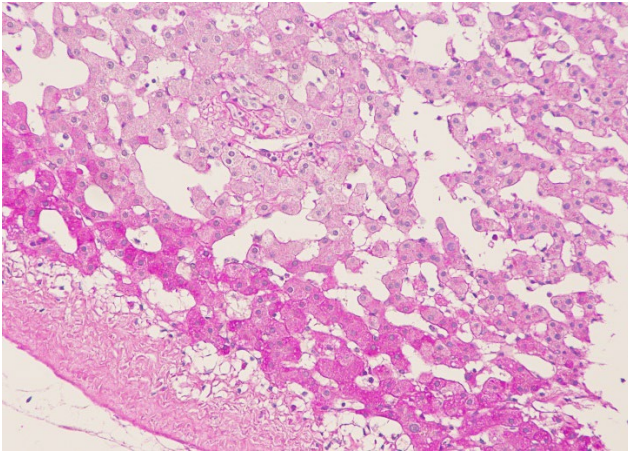

*Ficat cu glicogen*

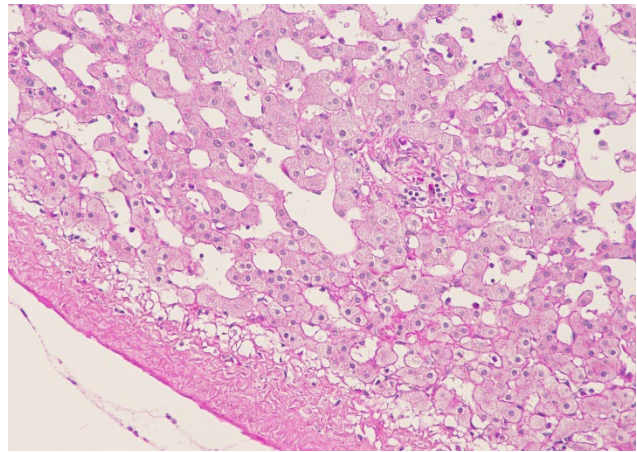

*Ficat după digestia enzimatică*

COD	DESCRIERE	NUMĂR TESTE
04-140808	Amilază	100 de teste

**IVD**

Diagnosticare in vitro - dispozitiv medical  
IVD din **Clasa A**, Reg. UE 2017/746  
UDI-DI: 08033976230692  
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Producător: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produs pentru prepararea probelor cito-histologice pentru microscopie optică.

Eliminarea glicogenului din secțiunile de țesut:

- Ficat, secțiuni încorporate în parafină: eliminarea glicogenului este recomandată pentru a observa numai mucinele epiteliale neutre. Această metodă este recomandată pentru biopsia ficatului.
- Secțiune de mușchi congelată.

### METODA

- 1) Introduceți secțiunile în apă distilată.
- 2) Aduceți soluția de amilază la temperatura camerei.
- 3) Acoperiți secțiunile cu soluție de amilază; incubați 10 minute la temperatura camerei.
- 4) Clățiți lamela de mai multe ori în apă distilată.
- 5) Colorați cu reacția P.A.S.

### Detalii tehnice

Specificațiile metodei	Durata procedurii	10 minute
	Echipment complementar	Nu este necesar
	Rezultate	După reacția PAS, eliminarea glicogenului este vizibilă prin compararea secțiunii probei cu o secțiune alăturată din același preparat care nu a fost tratată cu amilază.
Reactivi	Amilază din Bacillus subtilis A în soluție tamponată pH 7,3	30 ml
Depozitare	Depozitare	Depozitați preparatul la 2-8 °C. Păstrați recipientele bine închise.
	Temperatura de depozitare	2 - 8°C
	Stabilitate	După prima deschidere, produsul este reutilizabil până la data de expirare, dacă este depozitat corect.
	Valabilitate	1 an
Avertizare	Clasificarea produsului	Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical în laboratoare profesionale. Citiți cu atenție informațiile de pe etichetă (simbolurile de pericol, frazele de risc și de securitate) și consultați întotdeauna fișa cu date de securitate. Nu utilizați dacă recipientul primar este deteriorat. În caz de accident grav, vă recomandăm să informați imediat Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile competente.
	Eliminarea	Preparat periculos: respectați toate reglementările de mediu, de stat și locale, privind eliminarea deșeurilor.

REVIZUIREA nr.	MOTIV	DATA REVIZUIRII
001	Modificare a Regulamentului UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022