





AMYLÁZA

Na enzymatickú digesciu

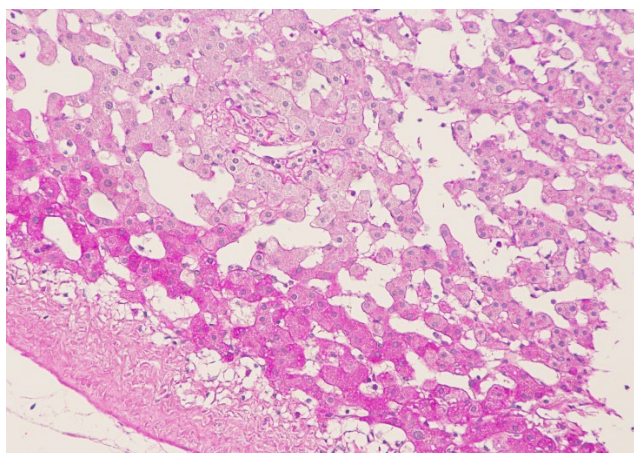

Pečeň s glykogénom

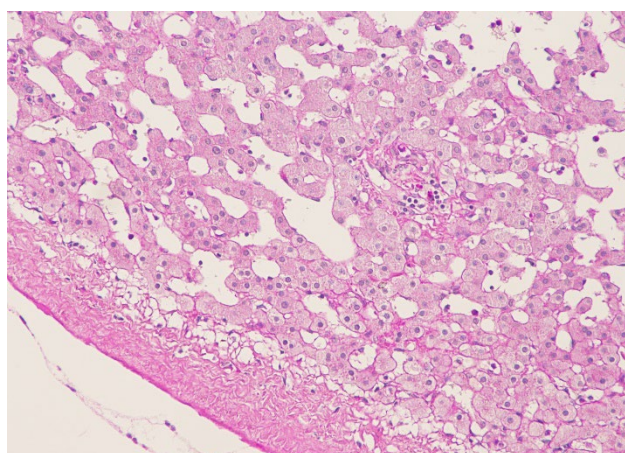

Pečeň po enzymatickej digescii

KÓD	OPIS	POČET TESTOV
04-140808	Amyláza	100 testov



Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746
UDI-DI: 08033976230692
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produkt na prípravu cytohistologických vzoriek pre optickú mikroskopiu.

Odstránenie glykogénu z tkanivových rezov:

- Pečeň, rezy zaliate v parafíne: odstránenie glykogénu sa odporúča na pozorovanie iba epitelových neutrálnych mucínov. Táto metóda sa odporúča pre biopsiu pečene.
- Zmrazený rez svalu.

METÓDA

- 1) Vložte rezy do destilovanej vody.
- 2) Nechajte roztok amylázy vytemperovať na izbovú teplotu.
- 3) Prekryte rezy roztokom amylázy: inkubujte po dobu 10 minút pri izbovej teplote.
- 4) Niekoľkokrát prepláchnite sklíčko v destilovanej vode.
- 5) Nafarbte pomocou reakcie P.A.S.

Technické podrobnosti

Špecifikácie metódy	Doba trvania postupu	10 minút
	Doplnkové vybavenie	Nepožaduje sa
	Výsledky	Po reakcii PAS je viditeľné odstránenie glykogénu pri porovnaní rezu vzorky so susedným rezom z rovnakého preparátu neošetreného amylázou.
Činidlá	Amyláza z Bacillus subtilis A v pufrovanom roztoku pH 7,3	30 ml
Skladovanie	Skladovanie	Preparát uchovávať pri teplote 2–8 °C. Nádoby uchovávať tesne uzavreté.
	Teplota skladovania	2–8 °C
	Stabilita	Po prvom otvorení je možné produkt používať opakovane až do dátumu expirácie za predpokladu jeho správneho uchovávanía.
	Trvanlivosť	1 rok
Varovanie	Klasifikácia produktu	Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných zdravotníckych pracovníkov. Pozorne si prečítajte informácie na štítku (symboly nebezpečenstva, R-vety a S-vety) a vždy sa oboznámte s informáciami uvedenými v karte bezpečnostných údajov. Nepoužívajte, ak je poškodený primárny obal. V prípade závažnej nehody odporúčame, aby ste okamžite informovali spoločnosť Bio-Optica Milano S.p.A. a príslušné úrady.
	Likvidácia	Nebezpečný preparát: dodržiavajte všetky národné a miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov.

Č. REVÍZIE	DÔVOD	DÁTUM REVÍZIE
001	Novelizácia nariadenia (EÚ) 2017/746 – IVDR	16/05/2022