




HIDEG LAP BCP230



KÓD	LEÍRÁS
40-300-203	BCP230 tálás hideg lap

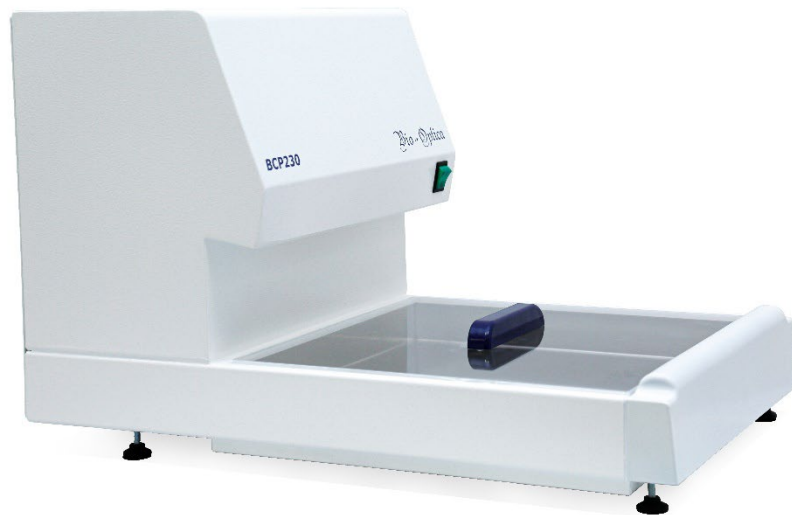

In vitro orvosi diagnosztikai eszköz
IVD az A osztályban, Reg EU 2017/746

UDI-DI: 08034120274739

Basic UDI: 080341202W0202059012M6



Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A.

Közzététel napja 2022.05.16.

Felülv. 001

A paraffinba merített szövettani minták gyors lehűtéséhez használt tálas hűtőlap.

RÉSZLETEZÉS

Méretek és súly	Méretek (L x P x H)	410 x 605 x 405 mm
	Hűtőfelület (H x M)	370 x 350 mm
	Súly	24 Kg
Elektromos adatok	Feszültség	230 V
	Frekvencia	50 ÷ 60 Hz
	Névleges fogyasztás	0,6 kW
	Biztosítékok	2 db 6.3 Amperes biztosíték – 5x20 mm – T6.3AH250V
Egyéb csatlakozások	Hidraulika csatlakozások	Nem szükséges
	Pára elszívás/szűrés	Nem szükséges
Figyelmeztetések és óvintézkedések	A termékek besorolása	A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült.
	Ajánlások	Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.P.A. és az illetékes hatóságok azonnali tájékoztatása.

KONSTRUKCIÓS JELLEMZŐK

- Festett lemez váz.
- Rozsdamentes acél hűtőfelület, legfeljebb 300 függőlegesen elhelyezett fiók befogadására alkalmas.
- Átlátszó plexiglass fedél a homogén hűtőkamra eléréséhez
- CFC mentes hűtőközeg: R134A, 75 gramm.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Működés: egyetlen ON/OFF gomb a bekapcsoláshoz és kikapcsoláshoz.
Hőmérséklet: -20° C (fedéllel)

BESZERELÉS

Helyezze a készüléket egy lapos és stabil munkapadra, és csatlakoztassa az elektromos aljzathoz (230V ~ 50/60Hz) a mellékelt kábel segítségével. Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert, és ne módosítsa a tartozék kábelt



FIGYELEM: Hagyjon legalább 15 cm szabad területet a hátsó rács mögött, hogy lehetővé tegye a hűtőrendszer megfelelő szellőzését és a készülék optimális hatékonyságát. Több egység beszerelése esetén soha ne helyezze a gépeket a hátsó szellőzórácsukkal egymás felé fordítva. Amennyiben ez nem lehetséges, hagyjon legalább 60 cm teret egy egyik hátsó rács és a másik között.

CE, EN 61010: 2010, IEC 61326-1: 2012, IECCE CB Report tanúsítvány.
CB tanúsítvány, közzétéve BLOCKCHAIN segítségével <https://blockchain.imq.it/>

FELÜLVIZSGÁLATI SZ.	INDOKLÁS	FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONT
001	Megfelel az EU UE 2017/746 - IVDR jogszabálynak	2022.05.16.

Közzététel napja 2022.05.16.
Felülv. 001