




## KÜLMUTUSPLAAT BCP230



KOOD	KIRJELDUS
40-300-203	Külmutusplaat BCP230

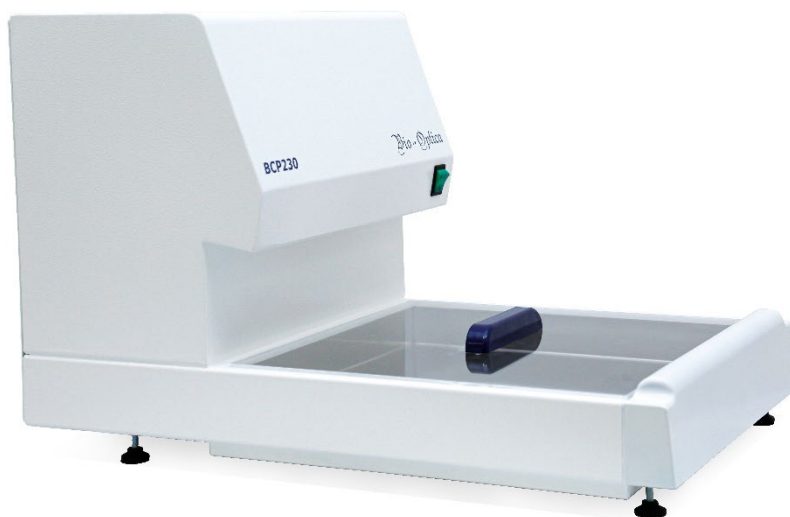

*In vitro* diagnostiline – meditsiiniseade  
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746  
UDI-DI: 08034120274739  
Basic UDI: 080341202W0202059012M6



Tootja: **Bio-Optica Milano S.p.A.**

Avaldamise kuupäev 16/05/2022  
Muudatus 001

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02.21.27.13.1 - Faks (Itaalia) +39 02.21.53.000 - Faks (eksport) +39  
02.21.54.155

Krüomoodul, mida kasutatakse parafiinis sisalduvate histoloogiliste proovide kiireks jahutamiseks.

### ÜLDINE TEAVE

Mõõtmed ja kaal	Mõõtmed (L x S x K)	410 x 605 x 405 mm
	Külmutuspinna mõõtmed (L x S)	370 x 350 mm
	Kaal	24 kg
Elektriühendused	Toide	230 V
	Sagedus	50 ÷ 60 Hz
	Toide	0,6 kW
	Kaitsmed	Kaks 6,3-amprilist kaitsset – 5 x 20 mm – T6,3AH250V
Muud ühendused	Veeühendused	Pole vajalikud
	Aurude äratõmme/filtreerimine	Pole vajalikud
Hoiatused ja ettevaatusabinõud	Toote klassifikatsioon	Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks laboratoorseks kasutamiseks.
	Soovitused	Tõsise õnnetusjuhtumi korral soovitame sellest viivitamatult teavitada ettevõtet Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi-

### STRUKTUURILISED OMADUSED

- Värvitud terasplekist korpus.
- Suur roostevabast terasest pind, mis pakub ruumi kuni 300 vertikaalsesse asendisse paigutatud parafiiniploki hoidmiseks.
- Varustatud pleksiklaasist läbipaistva katte ja 48 mm kõrguse servaga, kuhu on koondatud suurem osa külmutusvõimsusest, et saada külmkamber, mitte ainult külm tugitasand.
- Surutsükliga külmutussüsteem (ilma freoonita). Külmutusagens R134A 75 grammi.

### TEHNILISED OMADUSED

Töötamine: sisse- ja väljalülitusnupp ON/OFF  
 Temperatuur: töötemperatuur fikseeritud -20 °C (ülemise kaanega)

### PAIGALDAMINE

Asetage seade stabiilsele vibratsioonivabale laborilauale, mille töötasapind on horisontaalne ja tasane, ja mis paikneb võimalikult vibratsioonivabal maapinnal. Ühendage toitejuhtme pistik seadme tagaküljel olevasse ühenduspesa. Ühendage toitejuhe seinakontakti (230V ~ 50/60 Hz).

- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega adaptoreid ega muutke kaasasolevat toitejuhet.



**TÄHTIS.** Veenduge, et tagumisest võrest oleks vähemalt 15 cm vaba ruumi, et võimaldada külmutussüsteemi õhutamist ja süsteemi optimaalset jõudlust. Mitme seadme paigaldamisel ärge kunagi paigutage seadmeid nii, et nende tagumised õhutusvõred oleksid üksteise vastu. Kui see pole võimalik, jätke tagumise võre ja teise võre vahele vähemalt 60 cm vaba ruumi.

**Kohaldatavad standardid CE-märgisega, EN 61010: 2010, IEC 61326-1: 2012, IECEE CB-katsesertifikaat  
 Cb-katsesertifikaadid noteeritud BLOCKCHAINi veebilehel <https://blockchain.img.it/>**

MUUDATUSE NR	PÕHJUS	MUUDATUSE KUUPÄEV
001	Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) kohandamine	16/05/2022

Avaldamise kuupäev 16/05/2022  
 Muudatus 001