




AUŠINIMO PLOKŠTĖ BCP230



KODAS	APRAŠAS
40-300-203	Aušinimo plokštė BCP230

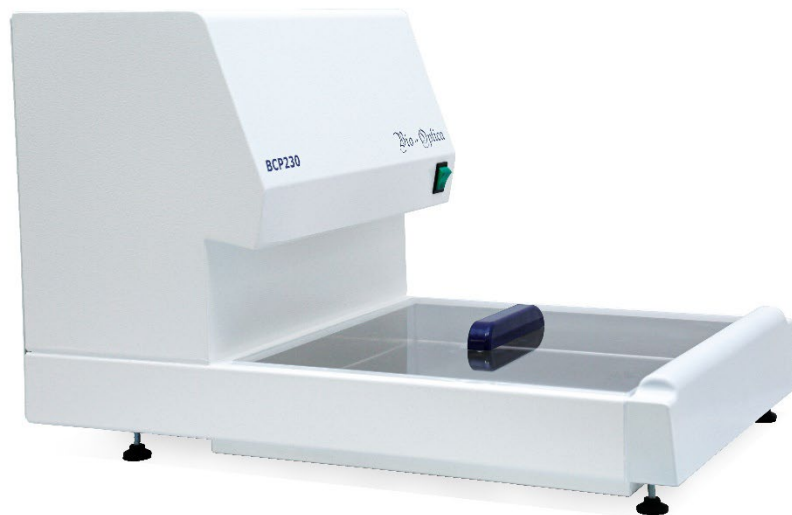

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746
UDI-DI: 08034120274739
Basic UDI: 080341202W0202059012M6



Gamintojas: **Bio-Optica Milano S.p.A.**

Paskelbimo data: 2022-05-16
001 red.

Šaldymo modulis, skirtas staigiai atšaldyti histologiniams mėginiams, įlietiems į parafiną.

BENDROJI INFORMACIJA

Matmenų duomenys	Matmenys (P × G × A)	410 × 605 × 405 mm
	Šaldančiojo paviršiaus matmenys (P × G)	370 × 350 mm
	Masė	24 kg
Elektros jungtys	Maitinimo šaltinis	230 V
	Dažnis	50 ÷ 60 Hz
	Galia	0,6 kW
	Saugikliai	2 lydieji saugikliai, 6,3 amperų – 5 x 20 mm – T6.3AH250V
Kitos jungtys	Vandens jungtys	Nereikia
	Dūmų trauka / filtravimas	Nereikia
Įspėjimai ir atsargumo priemonės	Gaminio klasifikacija	Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje laboratorijoje.
	Rekomendacijos	Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ kompetentingas institucijas

SANDAROS SAVYBĖS

- Dažyto lakštinio plieno važiuoklė.
- Ant didelio nerūdijančiojo plieno paviršiaus galima laikyti iki 300 parafino luitų, sudėtų vertikaliai.
- Tiekiamas su skaidriu organinio stiklo (Plexiglas) dangčiu ir 48 mm aukščio kraštu, kur sukoncentruota visa šaldomoji galia, kad susidarytų šaldoma kamera, o ne tik šaltį palaikantis uždangalas
- Šaldymo sistema su suslėgtąja grandine, be CFK. Šaltalas R134A 75 gramai.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Darbo eiga: Maitinimo jungiklis ON/OFF.

Temperatūra: nustatyta fiksuota –20 °C darbinė temperatūra (uždengus viršutiniu dangčiu)

ĮRENGIMAS

Statykite įrenginį ant stabilaus, nuo vibracijų apsaugoto laboratorinio stalo su horizontaliu, plokščiu paviršiumi ant grindų, kurios kuo geriau apsaugotos nuo vibracijos. Maitinimo laido kištuką įjunkite į įrenginio užpakaliniame skyde esantį jungiamąjį lizdą. Įjunkite įrenginį į maitinimo lizdą kabeliu, esančiu komplekte (230 V~, 50/60 Hz).

- Nenaudokite ilginamųjų laidų arba adapterių ir nemodifikuokite komplekte esančio kabelio.



SVARBU. Užtikrinkite, kad užpakalinės grotelės turi bent 15 cm erdvės, kad galėtų vėdintis aušinimas ir optimaliai veikti visa sistema. Jeigu statote kelis įrenginius, jokių būdu neglauskite įrenginių vienas prie kito užpakalinėmis vėdinimo grotelėmis. Jeigu neįmanoma to išvengti, palikite bent 60 cm atstumą tarp užpakalinių grotelių ir kito įrenginio.

Taikomi standartai pagal CE žymėjimą, EN 61010: 2010, IEC 61326-1: 2012, IECCE CB bandymo sertifikatas CB sertifikatai notarizuoti BLOCKCHAIN <https://blockchain.imq.it/>

REDAKCIJOS NR.	PRIEŽASTIS	PERŽIŪROS DATA
001	Reglamento (EU) Nr. 2017/746 koregavimas – IVDR	2022-16-05

Paskelbimo data: 2022-05-16
001 red.