



HISTOCOLD

Lagringssystem för en säker transport av histologiska prover
från operationssale till PA-labbet
(enligt europeisk förordning 605/2014)



KOD	BESKRIVNING	FÖRPACKNING	MÅTT
05-100200	HistoCold lösningsdispenser + skrivare	1 st	781 x 340 x 1230 mm
05-100205	Etikettrulle för HistoCold-skrivare	1 st (500 etiketter)	55 x 110 mm



Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A.

Utgivningsdatum: 29/02/2024
Rev. 002

HistoCold lösningsdispenser

Refrigerating dispenser of small dimensions for the dispensing of HistoCold solution. The instrument is provided with a pedal for an easy use. Instrumentet är gjort av AISI 304 stål.

HistoCold-dispensern ger möjlighet att dispensera vätskan genom svanhalskranen, vilken kan aktiveras med ett speciellt pedalreglage för bättre hygien.

Kod 05-100200 inkluderar monitor och skrivare.

Bruksanvisning


1. Öppna HistoCold-tanken genom att ta bort det blå locket;
2. Skruva på dispenserns aspirations slang på HistoCold-tanken;
3. Tryck på pedalen för att spilla den kylda lösningen.



Utgivningsdatum: 29/02/2024
Rev. 002

Tekniska funktioner

Mått Egenskaper	Mått (B x D x H)	781 x 340 x 1230 mm
	Piano di appoggio (W x D)	456 x 340 mm
	Vikt	52 kg
Elektriska anslutningar	Strömförsörjning	230 V
	Frekvens	50 - 60 Hz
	Effekt	0,2 kW
Varning och försiktighet	Produktklassificering	Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal.
	Rekommendationer	I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar

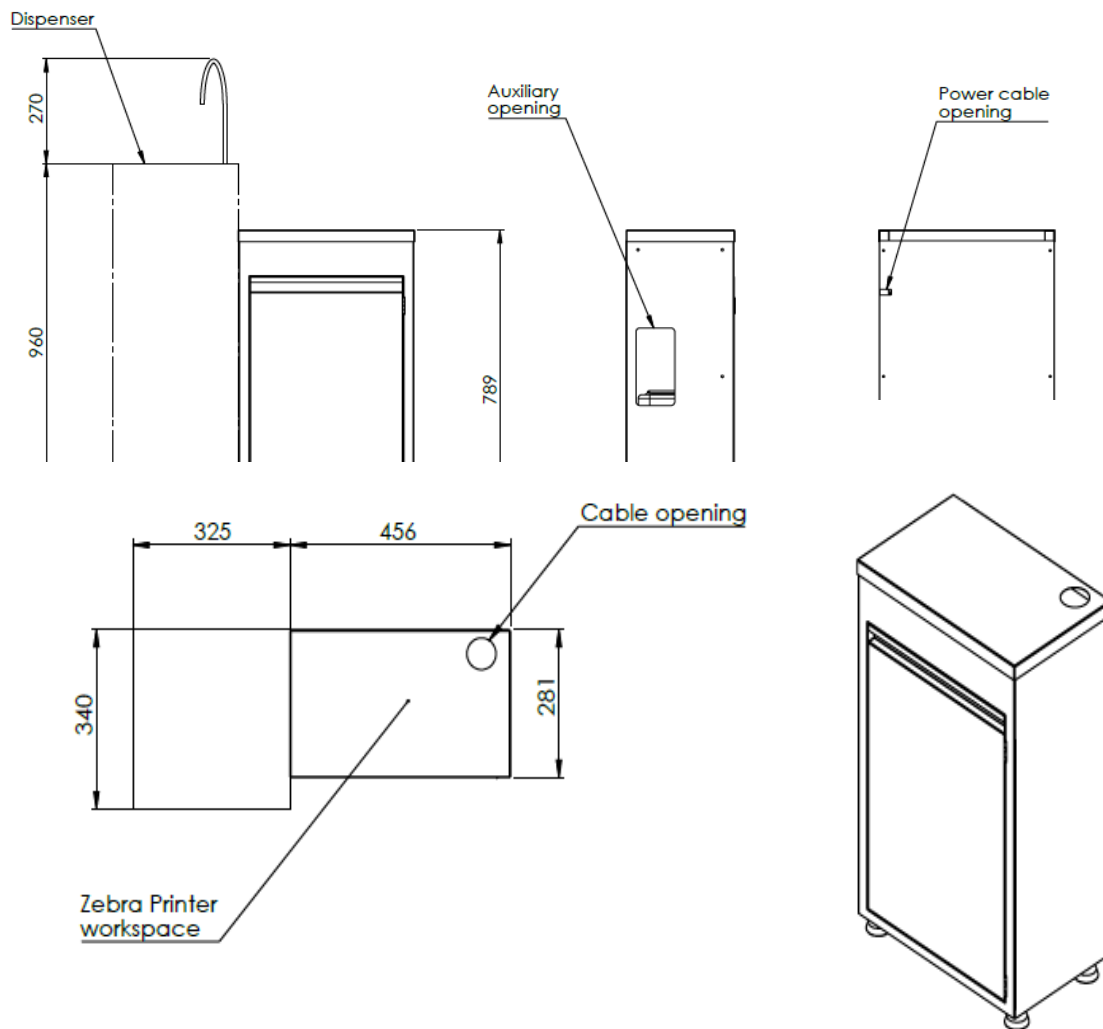

Utgivningsdatum: 29/02/2024

Rev. 002