



# AMYLASE

*Til enzymatisk udrådning*

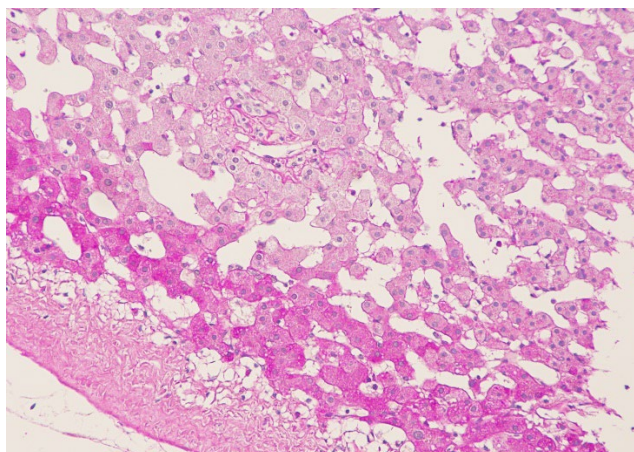

*Lever med glykogen*

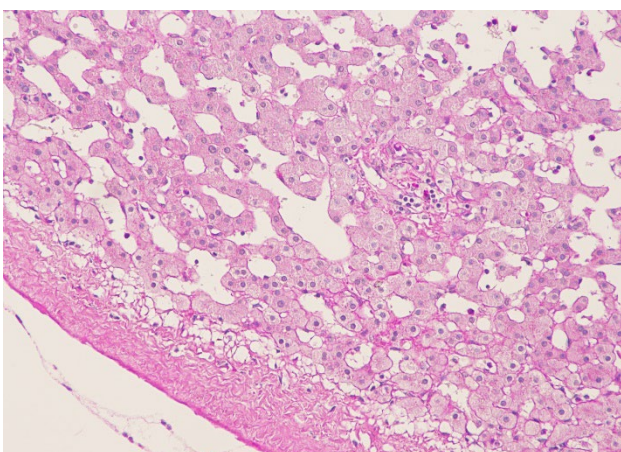

*Lever efter enzymatisk udrådning*

KODE	BESKRIVELSE	TESTNUMMER
04-140808	Amylase	100 test



In vitro diagnose – medicinsk enhed  
IVD i **klasse A**, reg. UE 2017/746  
UDI-DI: 08033976230692  
Basic UDI: 080339762W01030799Y5



Producent: Bio-Optica Milano S.p.A.

Produkt til forberedning af cyto-histologiske prøver til optisk mikroskopi.

Fjernelse af glykogen fra vævssektioner:

- Lever, paraffinindlejrede sektioner: fjernelse af glykogen er kun tilrådeligt for at observere epitelneutrale muciner. Denne metode anbefales til leverbiopsi.
- Muskelfrosset sektion.

### METODE

- 1) Bring sektionerne til destilleret vand.
- 2) Bring amylase-opløsningen til rumtemperatur.
- 3) Dæk sektionerne med amylase-opløsningen: inkuber i 10 minutter ved rumtemperatur.
- 4) Skyl skiven i destilleret vand flere gange.
- 5) Farvning med P.A.S.-reaktion.

### Tekniske oplysninger

Specifikationer for metode	Proceduretid	10 minutter
	Ekstraudstyr	Ikke anmodet
	Resultater	Efter PAS-reaktionen er fjernelsen af glykogen synlig, ved at sammenligne prøvesektionen med en tilstødende sektion fra det samme præparat, der ikke er behandlet med amylase.
Reagens	Amylase fra Bacillus subtilis A i bufferopløsning pH 7,3	30 ml
Opbevaring	Opbevaring	Opbevar prøven ved 2 - 8 °C. Hold beholderne tætlukkede.
	Opbevaringstemperatur	2 - 8 °C
	Stabilitet	Efter den første åbning kan produktet genbruges indtil udløbsdatoen, hvis det opbevares korrekt.
	Gyldighed	1 år
Advarsel	Produktklassificering	Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af sundhedsprofessionelle. Læs omhyggeligt oplysningerne på mærkatet (faresymboler, risiko- og sikkerhedsfraser), og læs altid sikkerhedsdatabladet. Må ikke bruges hvis den primære beholder er beskadiget. I tilfælde af en alvorlig ulykke anbefaler vi, at du omgående informerer Bio-Optica Milano S.p.A samt de kompetente myndigheder.
	Bortskaffelse	Farlig prøve: overhold alle statslige og lokale miljøbestemmelser angående bortskaffelse af affald.

REVISION nr.	ÅRSAG	REVISIONSDATO
001	Justering af bestemmelse UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022