




BIOKASETIT

Valamiseen

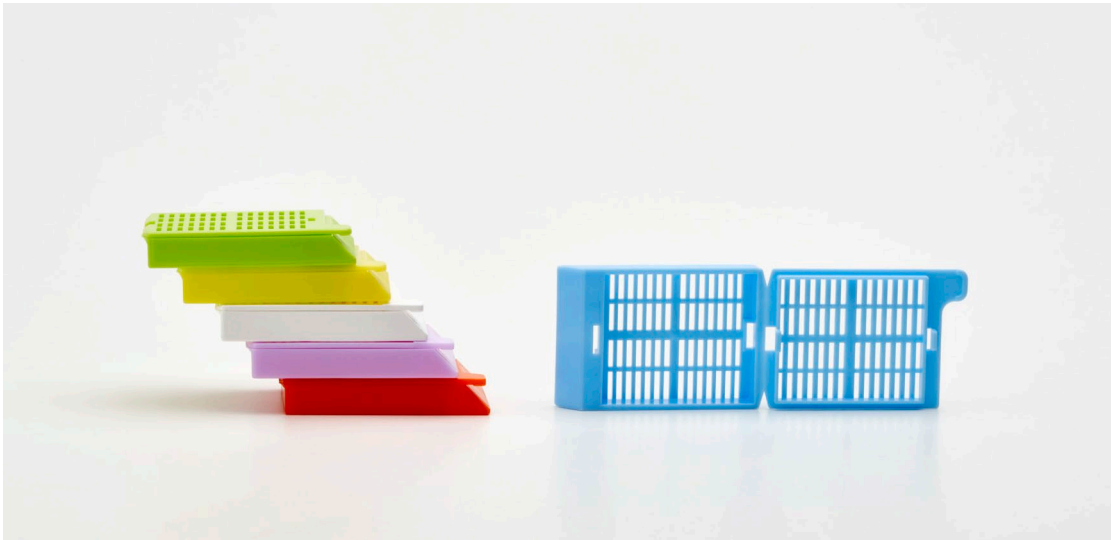

KOODI	VÄRI	PAKKAUS	UDI-DI
07-7100	Valkoinen	1 500 kpl (3 pakkausta, kussakin 500 kpl)	08033976235253
07-7110	Oranssi	1 500 kpl (3 pakkausta, kussakin 500 kpl)	08033976235260
07-7120	Sininen	1 500 kpl (3 pakkausta, kussakin 500 kpl)	08033976235277
07-7130	Keltainen	1 500 kpl (3 pakkausta, kussakin 500 kpl)	08033976235284
07-7140	Liila	1 500 kpl (3 pakkausta, kussakin 500 kpl)	08033976235291
07-7150	Vaaleanpunainen	1 500 kpl (3 pakkausta, kussakin 500 kpl)	08033976235307
07-7160	Vihreä	1 500 kpl (3 pakkausta, kussakin 500 kpl)	08033976235314
07-7180	Harmaa	1 500 kpl (3 pakkausta, kussakin 500 kpl)	08033976235321



In vitro -diagnoosiin tarkoitettu
lääkinnällinen laite
IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746



Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030501YL



Kertakäyttöinen

Julkaisupäivä: 16/05/2022
Versio 001

Vakiokasetit histologisten näytteiden valamista varten.

TEKNISET OMINAISUUDET

Kaseteissa on kansi ja suorakulmaiset aukot. Kaksoislukitusjärjestelmä varmistaa, että kasetit eivät aukea käsittelyn aikana. Valmistettu polyasetaalista: tämä muovi on vakaa korkeissa lämpötiloissa ja mikroaaltouunin, liuottimien, happojen ja emästen käytön yhteydessä. Siksi se sopii ihanteellisesti histologisten prosessien käsittely- ja valuvaiheisiin. Näytteiden tunnistusmerkinnät voi tehdä kasetin kolmelle sivulle. Näille pinnoille voi kirjoittaa kynillä ja histologiakynillä (11-50 tai 11-400), ja ne ovat yhteensopivia automaattisten Leica IP- ja Sakura Autowrite -kasettitulostinten kanssa. Biokasettien valmistaminen on teknisesti laadukasta. Monimutkaisista yksityiskohdista ja käytetyn materiaalin tyyppistä huolimatta viallisten kasettien osuus on vain 0,5 % (5 000 PPM). Siksi Bio-Optica ei ota vastaan reklamaatioita tai vaihda tuotteita takuun puitteissa.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Kemiallinen koostumus	Polyasetaaali (polyoksimeteeni)
	Sisämitat	30 x 25 x 5 mm
	Ulkomitat	40 x 28 x 6 mm
	Aukkojen mitat	(5,8 ± 0,2) x (1 ± 0,1) mm
	Pinnan kaltevuus	45°
	Paino	3,40 g
Pakkaus	Primaaripakkaus	Edestä aukeava pahvikotelo, josta kasetit on helppo ottaa ulos.
	Sekundääripakkaus	Pahvikotelo.
Säilytys	Säilytysolosuhteet	Tällainen materiaali ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
	Stabiiliteetti	Avattu tuote on stabiili.
	Säilyvyysaika	Ei koske tällaisia tuotteita
Varoitukset ja varotoimet	Käyttöohjeet	Ei koske tätä tuotetta.
	Tuotteen luokitus	Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Tuote ei ole kemiallisesti vaarallinen. Varoitukset ja varotoimet eivät ole tarpeen.
	Hävittäminen	Noudata kaikkia jätteiden hävittämistä koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä.
	Suositukset	Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin.

VERSION NRO	SYY	MUOKKAUKSEN PVM
001	Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti	16.5.2022

Julkaisupäivä: 16/05/2022
Versio 001