




## BIOKASSETTER

För inbäddning

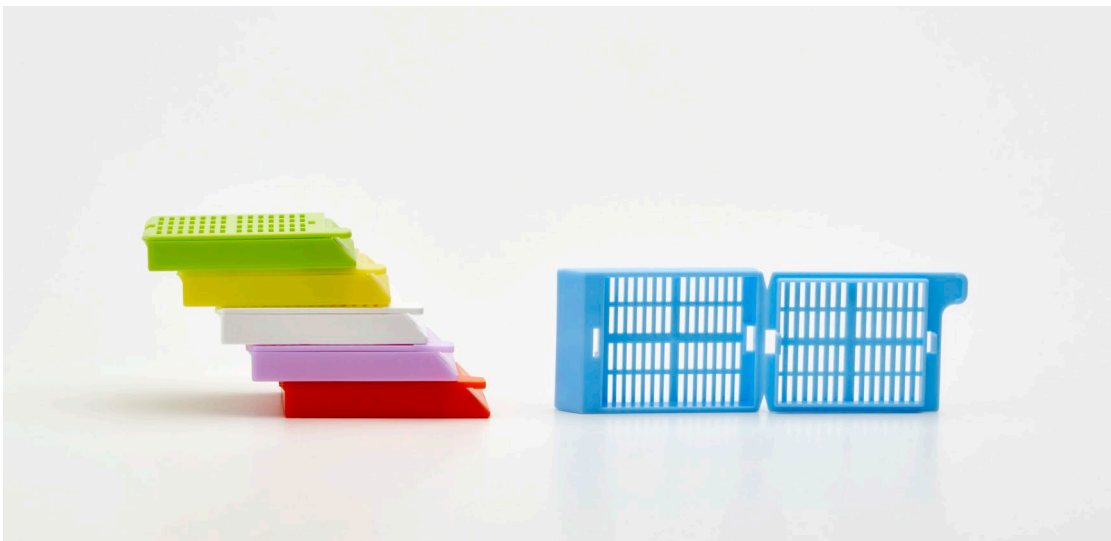

KOD	FÄRG	FÖRPACKNING	UDI-DI
07-7100	Vita	1.500 st (3 dispenserar med 500 st i varje)	08033976235253
07-7110	Orange	1.500 st (3 dispenserar med 500 st i varje)	08033976235260
07-7120	Blå	1.500 st (3 dispenserar med 500 st i varje)	08033976235277
07-7130	Gula	1.500 st (3 dispenserar med 500 st i varje)	08033976235284
07-7140	Lila	1.500 st (3 dispenserar med 500 st i varje)	08033976235291
07-7150	Rosa	1.500 st (3 dispenserar med 500 st i varje)	08033976235307
07-7160	Gröna	1.500 st (3 dispenserar med 500 st i varje)	08033976235314
07-7180	Grå	1.500 st (3 dispenserar med 500 st i varje)	08033976235321



Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet  
IVD Klass A, Förord. UE 2017/746



Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A.

Basic UDI: 080339762W05030501YL



Engångsbruk

Utgivningsdatum: 16/05/2022

Rev. 001

Standardkassetter för inbäddning av histologiska prover.

### TEKNISKA EGENSKAPER

Kassetter med lock och rektangulära hål, med ett dubbelt förslutningssystem för att garantera en perfekt inlåsning under bearbetningsfasen.

Denna polymer, tillverkad av acetalpolymer, är stabil vid höga temperaturer, mikrovågsåtgärder, lösningsmedel, syror och alkalier. Detta material är därför optimalt för bearbetnings- och inbäddningsfaserna i den histologiska processen.

Provets identifiering är möjlig tack vare den skrumpna ytan på tre kassettsidor. Dessa ytor kan skrivas på med pennor, histologipennor (11-50 eller 11-400) och de är kompatibla med automatiska kassettskrivare Leica IP and Sakura Autowrite.

Biokassetter tillverkas med vår bästa teknik. På grund av komplexiteten i själva detaljerna, och typen av material som används, anses det vara en fysiologisk mängd defekta kassetter på 5,000 PPM (Parts Per Million), motsvarande en procentsats på 0,5 %. Inom denna mängd accepterar inte Bio-Optica reklamationer och/eller utbyte under garanti.

### Tekniska data

Tekniska specifikationer	Kemisk sammansättning	Acetalpolymer (polyoximetylenpolyacetal).
	Inre mått	30 x 25 x 5 mm
	Yttre mått	40 x 28 x 6 mm
	Hålens mått	(5,8 ± 0,2) x (1 ± 0,1) mm
	Ytans lutning	45°
	Vikt	3,40 g
Förpackning	Primär behållare	Kartongdispensrar med frontal öppning för enkel urtagning av kassetter.
	Sekundär behållare	Kartonglåda.
Förvaring	Förvaringsförhållanden	Särskilda förhållanden är ej nödvändiga för denna typ av material.
	Stabilitet	Efter första öppning är produkten stabil.
	Validitet	Ej tillämpligt för denna typ av produkt
Varning och försiktighet	Bruksanvisning	Krävs ej för denna produkt.
	Produktklassificering	Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad hälsovårdspersonal. Produkten är ej kemiskt farlig. Inga varningar eller försiktighetsåtgärder krävs.
	Kassering	Följ alla nationella och lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.
	Rekommendationer	I händelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter.

REVISIONSNUMMER	ORSAK	REVISIONSDATUM
001	Justering av förordning UE 2017/746 - IVDR	16/05/2022

Utgivningsdatum: 16/05/2022

Rev. 001