


## Carta politenata

### Notizie generali

Carta plastificata da banco. Per usi generici di laboratorio.

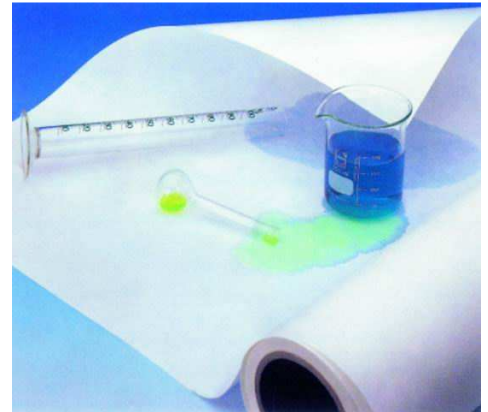

Codice	Confezionamento	Dimensioni fogli
08-CA2000	100 pz. (2 x 50 pz.)	(48 x 60) cm

Produttore: Gruppo Cordenons - Italia -

Distributore: **Bio-Optica Milano S.p.A.**

### Caratteristiche tecniche e funzionali

Carta da filtro liscia ed assorbente accoppiata a un foglio di polietilene di 16 g/m<sup>2</sup>, indispensabile per la pulizia e l'igiene di tutti i laboratori, con specifico riferimento al settore sanitario.

- Grammatatura 145 g/m<sup>2</sup>.
- Spessore 0,29 mm.

I fogli di carta politenata svolgono due funzioni:

- Il lato assorbente trattiene i liquidi.
- Il lato impermeabile impedisce che i liquidi passino sulla superficie sottostante.

Data la tipologia di prodotto, non sono necessarie particolari misure per la conservazione e lo stoccaggio. Il prodotto non è soggetto a data di scadenza.