




KASETE ZA UKLAPANJE

Za uklapanje

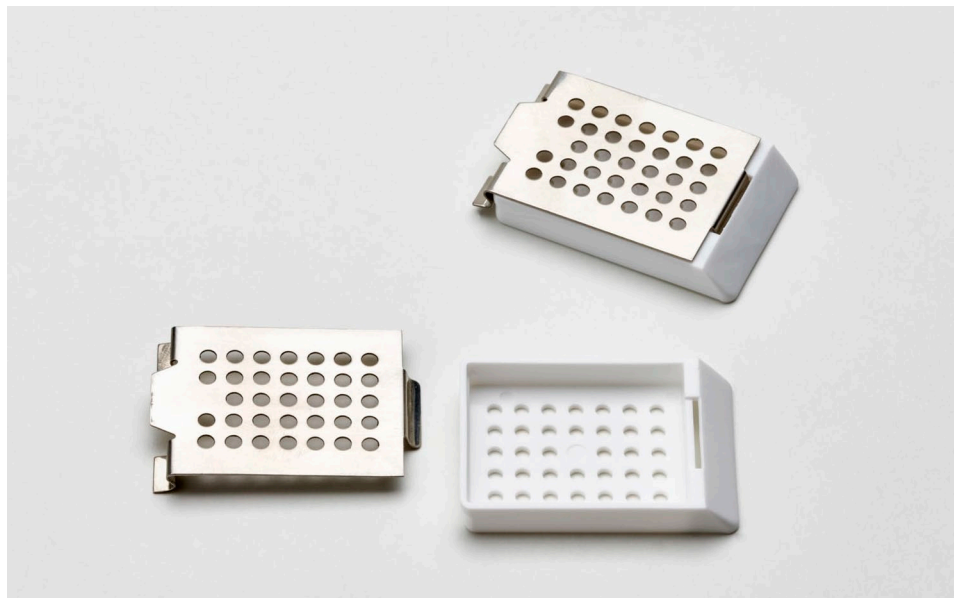

ŠIFRA	OPIS	AMBALAŽA	UDI-DI	Basic UDI
07-7350	Bijele boje	3,000 kom. (3 dozatora s 1000 kom. svaki)	08033976235451	080339762W05030501YL
07-086-74195	Metalni poklopac	10 kom	08033976235208	080339762W05030580ZA



In vitro medicinsko-dijagnostički proizvod
IVD Klasa A, Ur. (EU) 2017/746



Proizvođač: Bio-Optica Milano S.p.A.



Jednokratan

Datum izdanja: 16/05/2022
Rev. 001

Kasete za uklapanje histoloških uzoraka za korištenje s višekratno upotrebljivim metalnim poklopcem.

OPĆE ZNAČAJKE

Kasete proizvedene uz primjenu acetalnog polimera: ovaj polimer stabilan je na visokim temperaturama, pri mikrovalnim postupcima, otapalima, kiselinama i lužinama; stoga je taj materijal optimalan za obradu i faze uklapanja u histološkim procesima. Identifikacija uzorka moguća je zahvaljujući smežuranoj površini na tri stranice kasete. Te su površine prikladne da se po njima piše kemijskom olovkom. Preporučujemo da se za trajno označavanje upotrijebi histološki flomaster (šifra 11-50 ili 11-400). Kasete za uklapanje proizvodimo služeći se svojim najboljim tehničkim vještinama, međutim, zbog složenosti samih detalja i vrste korištenog materijala, potrebno je uzeti u obzir da je fiziološka količina neispravnih kaseti jednaka 5,000 PPM (eng. Parts Per Million, dijelova na milijun), što odgovara postotku od 0,5 %. U ovoj količini, Bio-Optica ne prihvaća pritužbe i/zahtjeve za zamjenu u okviru jamstva.

Tehnički podaci

Tehnički podaci	Sastav	Acetalni polimer (polioksimetilen poliacetal)
	Unutarnje dimenzije	30 x 25 x 5 mm
	Vanjske dimenzije	40 x 28 x 6 mm
Ambalaža	Primarni spremnik	Kartonska dozirna kutija s otvorom s prednje strane za vađenje kasete.
	Sekundarni spremnik	Kartonska kutija
Čuvanje	Uvjeti čuvanja	Ništa
	Stabilnost	Nakon prvog otvaranja, proizvod je stabilan.
	Valjanost	Nije primjenjivo na ovu vrstu proizvoda.
Upozorenje i mjere opreza	Upute za uporabu	Nisu navedene za ovaj proizvod.
	Klasifikacija proizvoda	Proizvod je namijenjen zdravstvenim djelatnicima za profesionalnu laboratorijsku upotrebu. Proizvod nije kemijski opasan. Mjere upozorenja i predostrožnosti nisu potrebne.
	Odlaganje	Pridržavati se svih državnih i okolišnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje otpada.
	Preporuke	U slučaju ozbiljnog incidenta, preporučujemo da odmah informirate tvrtku Bio-Optica Milano S.p.A i nadležna tijela.

IZMJENA br.	RAZLOG	DATUM IZMJENE
001	Prilagodba uredbe (EU) 2017/746 - IVDR	16.5.2022.

Datum izdanja: 16/05/2022

Rev. 001