



## **HISTOCOLD**

*Säilytysjärjestelmä histologisten näytteiden turvallista kuljetusta  
Varten leikkaussalista patologisen anatomian laboratorioon  
(täyttää EU-asetuksen 605/2014 vaatimukset)*



KOODI	KUVAUS	PAKKAUS	MITAT
05-100200	HistoCold-liuoksen annostelija + tulostin	1 kpl	781 x 340 x 1230 mm
05-100205	Etikettirulla HistoCold-tulostimeen	1 kpl (500 etikettiä)	55 x 110 mm



Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.

Julkaisupäivä: 29/02/2024  
Versio 002

### HistoCold-liuoksen annostelija

Pienikokoinen jäähditysannostelija HistoCold-liuoksen annosteluun. Instrumentissa on helppokäyttöinen poljin. Laitteen kotelo on valmistettu AISI 304 -teräksestä.

HistoCold-annostelijassa on hanhenkaulahana nesteen annostelua varten. Hanaa voidaan käyttää hygieenisesti jalkapolkimella. Tuotteessa, jonka koodi on 05-100200, on mukana näyttö ja tulostin.

### Käyttöohjeet


1. Avaa HistoCold-säiliö irrottamalla sininen kansi;
2. Ruuvaa annostelijan imuputki HistoCold-säiliöön;
3. Kaada jäähdytetty liuos painamalla poljinta.



Julkaisupäivä: 29/02/2024  
Versio 002

### Tekniset ominaisuudet

Mitat	Mitat (L x S x K)	781 x 340 x 1 230 mm
	Työtaso (L x S)	456 x 340 mm
	Paino	52 kg
Sähkökytkennät	Virtalähde	230 V
	Taajuus	50 ÷ 60 Hz
	Teho	0,2 kW
Varoitukset ja varotoimet	Tuotteen luokitus	Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön terveydenhuollon ammattilaisten toimesta.
	Suosituksiset	Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti yhteyttä

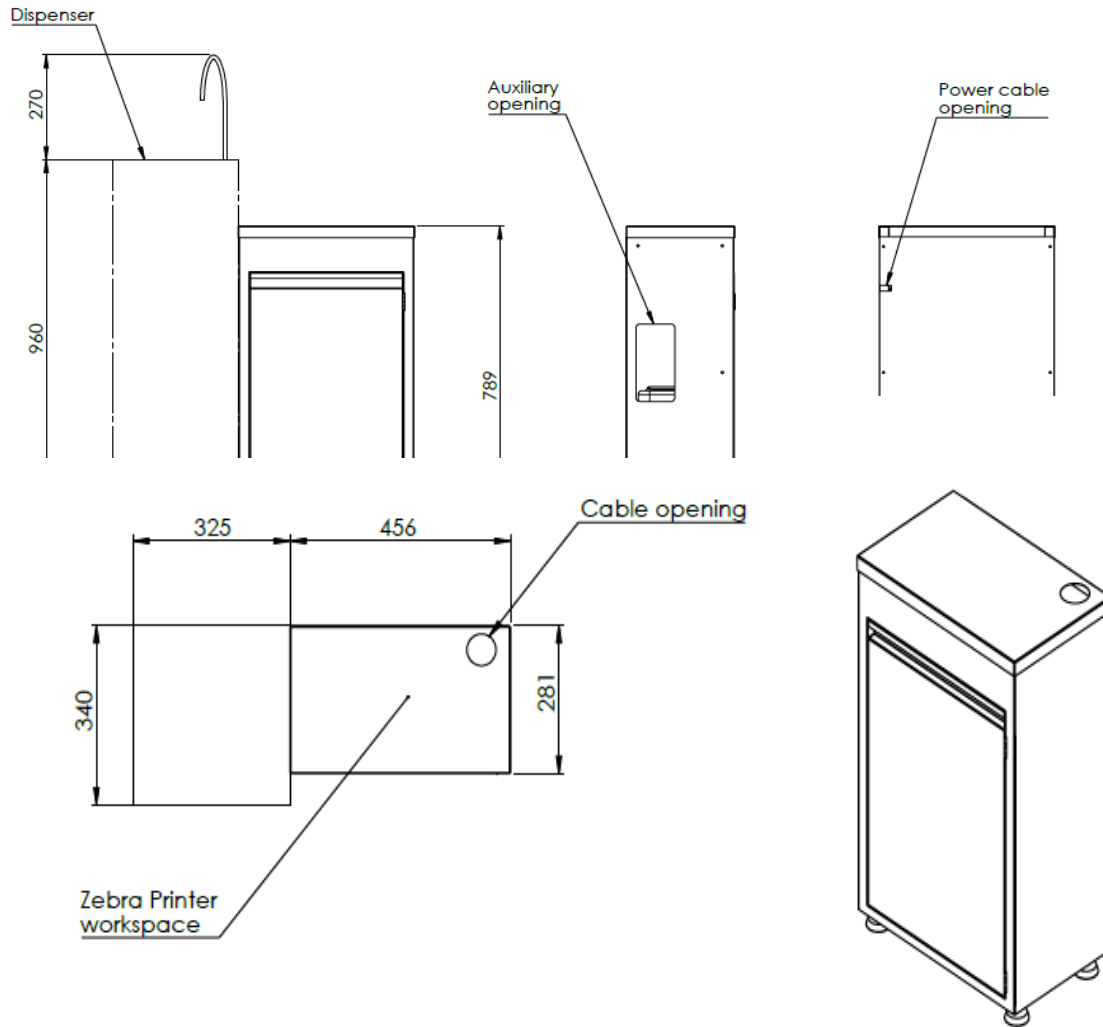

Julkaisupäivä: 29/02/2024

Versio 002