



## HISTOCOLD

*Glabāšanas sistēma drošai histoloģisku paraugu pārvadāšanai  
no operāciju zāles uz PA laboratoriju  
(Atbilstoši Eiropas Regulai 605/2014)*



KODS	APRAKSTS	IEPAKOJUMS	IZMĒRI
05-100200	HistoCold šķiduma dozators + printeris	1 gab.	781 x 340 x 1230 mm
05-100205	Histocold printera etiķešu rullītis	1 gab. (500 etiķetes)	55 x 110 mm



Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A.

Izdošanas datums: 29/02/2024

Red. 002

### *HistoCold šķīduma dozators*

Maza izmēra saldēšanas dozators HistoCold šķīduma dozēšanai. Instruments ir aprīkots ar pedāli ērtai lietošanai. Instruments ir gatavots no AISI 304 tērauda.

Ar HistoCold dozatoru var dozēt šķīdumu caur izliekto krānu, kuru var aktivizēt ar speciālu pedāli labākas higiēnas nolūkos.

Kodā 05-100200 ir iekļauts monitors un printeris.

### *Lietošanas instrukcija*

1. Atveriet HistoCold tvertni, noņemot zilo vāku;
2. Uzskrūvējiet dozatora aspirācijas cauruli uz HistoCold tvertnes;
3. Nospiediet pedāli, lai izlietu atdzesēto šķīdumu.




Izdošanas datums: 29/02/2024

Red. 002

**Tehniskās īpašības**

Izmēri	Izmēri (P x Dz x A)	781 x 340 x 1230 mm
	Balsta virsma (P x Dz)	456 x 340 mm
	Svars	52 kg
Elektriskie savienojumi	Strāvas padeve	230 V
	Frekvence	50 ÷ 60 Hz
	Jauda	0,2 kW
Brīdinājums un norādes par piesardzību	Produkta klasifikācija	Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības aprūpes speciālistiem.
	Ieteikumi	Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes.

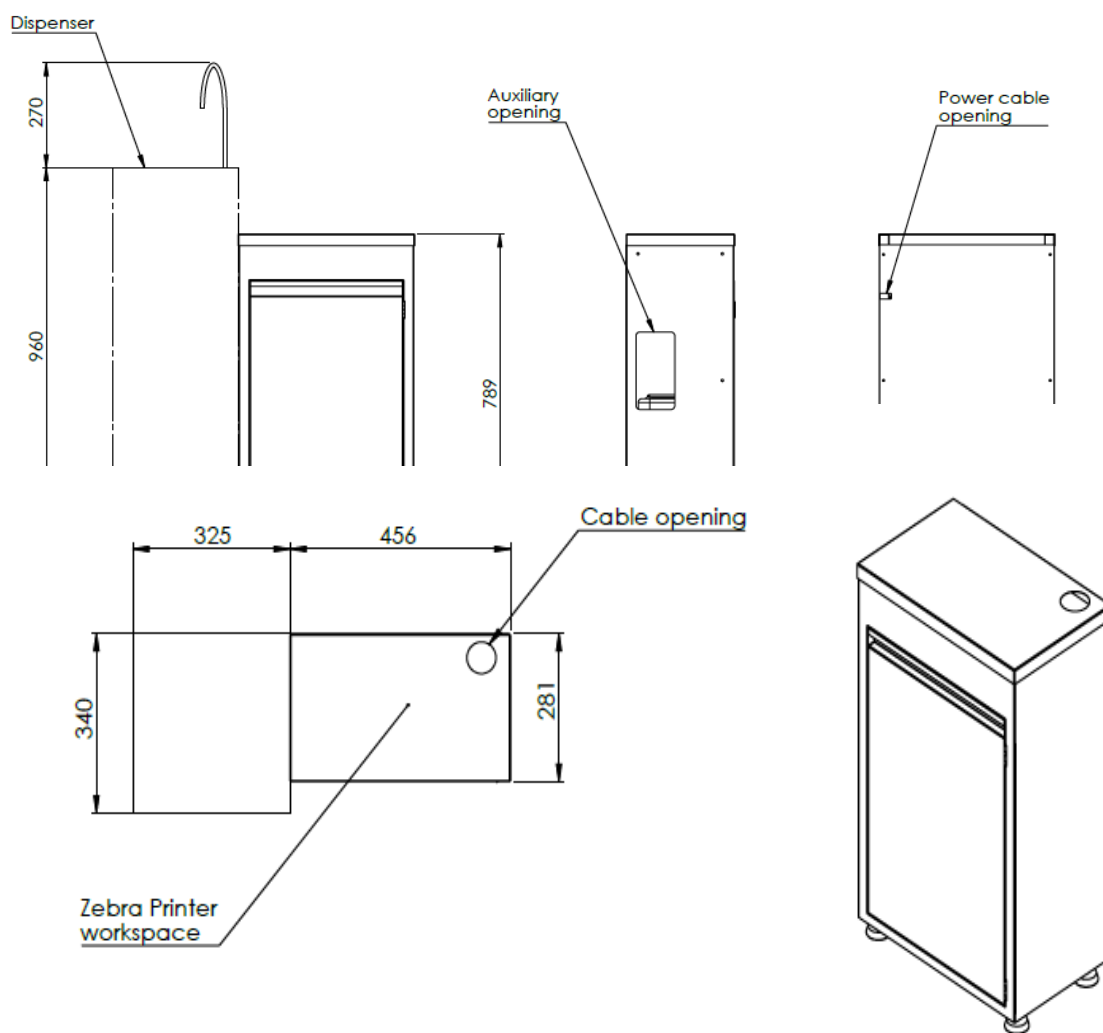

Izdošanas datums: 29/02/2024

Red. 002