


Histoslide

Archivador para portaobjetos

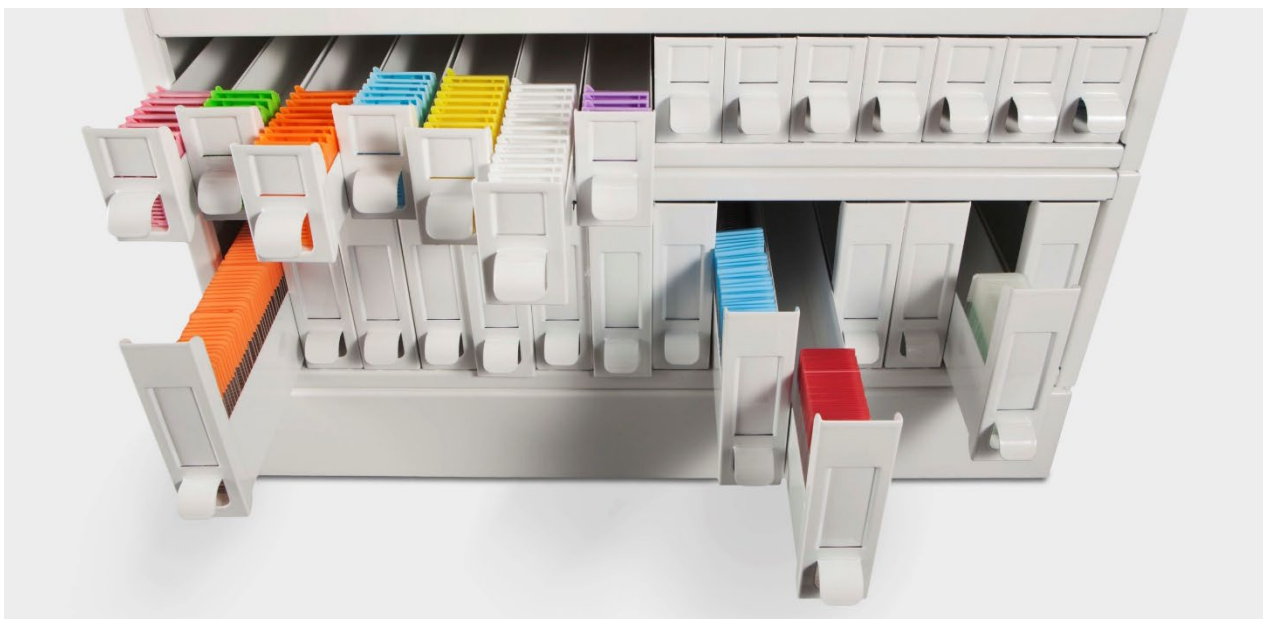

En la foto, de arriba:

- Histoblock
- Histoslide
- Base

| CODIGO | DESCRIPCION | ENVASE |
|------------|---|--------|
| 03-5000-14 | Histoslide, archive for microscope slides | 1 un. |



Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)

Publicacion: 22/07/2024
Rev. 03

El módulo Histoslides está construido en chapa metálica, espesor 9/10, lacado de color blanco.

Está compuesto de 14 cajones deslizantes. Cada cajón es tá provisto de una pequeña pestaña frontal para su manipulación, con la posibilidad de insertar una etiqueta. El módulo Histoslides, compuesto de 14 cajas, puede contener 5000 portaobjetos aproximadamente.

En cada caja se puede colocar un muelle espaciador, para separar los portaobjetos que no están secos todavía, y evitar que se peguen uno al otro. En este caso, la capacidad está limitada a 2000 portaobjetos.

Cada módulo puede estar provisto de una base (dimensiones 490 x 490 x 60mm) y de una tapa dimensiones 490 x 490 x 25mm), igualmente fabricados enchapa blanca lacada.

La posibilidad de superponer varios archivadores (hasta un máximo de 10 módulos) permite optimizar el espacio de almacenamiento, garantizando al mismo tiempo la protección del contenido. Cada módulo se suministra en un embalaje de cartón con indicaciones de posicionamiento para evitar daños durante el transporte.

Accesorios opcionales

| CODIGO | DESCRIPCION | ENVASE |
|------------|----------------------------------|--------|
| 03-5000-BA | Base por Histoslides, blanco | 1 un. |
| 03-5000-CO | Cubierta por Histoslides, blanco | 1 un. |
| 03-5000-MD | Muelle espaciador | 1 un. |

Especificaciones técnicas

| | | |
|----------------|-------------------------------|--|
| Technical data | Material | Chapa metallica |
| | Dimensiones (l x p x h) | 490 x 490 x 140 mm |
| | Peso (vacío) | 13 kg |
| | Peso (lleno) | 42 kg |
| | Cajóns para módulo | 14 |
| | Capacidad para modulo | Sobre 5000 portaobjetos |
| Envase | Envase primario | Caja de carton |
| | Etiqueta | Papel adhesivo lable en el embalaje externo |
| | Envase secundario | No presente |
| Almacenamiento | Almacenamiento | Dado el tipo de producto no son necesarias medidas especiales de conservación y almacenamiento. |
| | Temperatura de almacenamiento | No hay limitaciones particulares. |
| | Estabilidad | El producto se considera estable en el tiempo. |
| | Validez | No aplica. |
| Avertencias | Metodo de uso | No son necesarias precauciones especiales para el correcto uso del producto. |
| | Clasificación del producto | El producto está destinado al uso de personal técnico especializado. El producto no está clasificado como peligroso. |
| | Forma de eliminación | Eliminar según las leyes vigentes. |

Publicacion: 22/07/2024

Rev. 03