




# SUPERMEGAKASSETTEN

Zum Einbetten

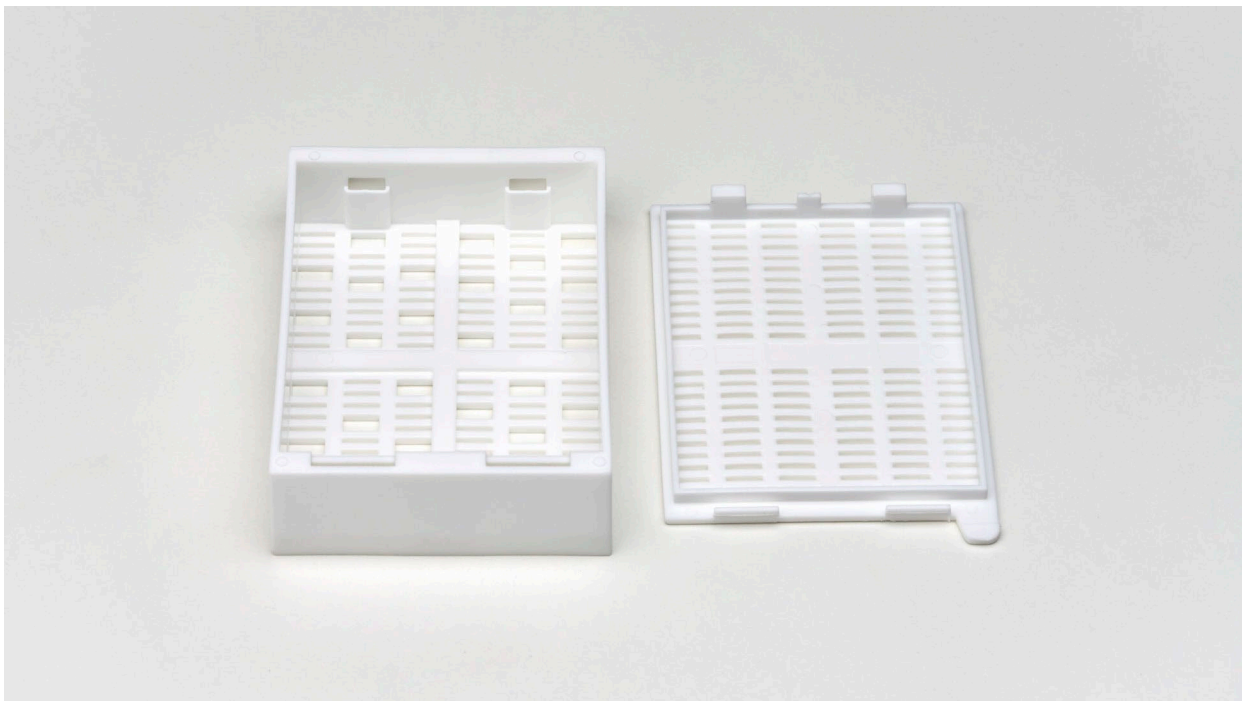

CODE	FARBE	VERPACKUNG
07-7000	Weiß	200 Stk. (3 Spender: 2 zu 100 Kassetten und 1 zu 200 Deckeln)



Medizinprodukt - In-vitro-Diagnostikum  
IVD in **Klasse A**, Reg. EU 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030501YL  
UDI-DI: 08033976235215



Hersteller: Bio-Optica Milano S.p.A.



Einwegprodukt

Veröffentlichungsdatum: 16/05/2022

Rev. 001

Kassetten zum Einbetten von Makroschnitten.

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kassetten für histologische Einbettungen von histologischen Makroschnitten, ausgestattet mit einem doppelten Verschlusssystem, das eine perfekte Dichtheit während der Verarbeitung garantiert.

Die Kassetten bestehen aus Acetalharz: Dieses Material besitzt eine hervorragende Stabilität gegenüber hohen Temperaturen, Mikrowellenbehandlungen, Lösungsmitteln, Säuren und Laugen; das Material ist daher optimal für die Verarbeitung und Einbettung von Teilen in Paraffin geeignet.

Die Identifizierung des Inhalts wird durch raue Oberflächen auf drei Seiten der Kassette erleichtert, die sich zum Beschriften mit Bleistiften, Histologie-Stiften (Code 11-50 11-400).

Im Vergleich zu herkömmlichen Makroschnittkassetten haben die SuperMegaKassetten von Bio-Optica einige größere Löcher. Dadurch kann das Paraffin während der Einbettungsphase besser greifen, um ein versehentliches Brechen des Blocks beim Schneiden mit dem Mikrotom zu vermeiden.

Die SuperMegaKassetten werden nach bestem technischen Wissen hergestellt. Aufgrund der Komplexität der Bio-Kassetten und der Art des verwendeten Materials ist eine Menge an fehlerhaften Bio-Kassetten von 5.000 PPM (Parts Per Million), was einem Prozentsatz von 0,5% entspricht, als physiologisch anzusehen.

Reklamationen und/oder Anträge auf Ersatz im Rahmen der Garantie werden innerhalb dieser Menge nicht akzeptiert.

### Spezifikationen

Technische Spezifikationen	Chemische Zusammensetzung	Acetalharz (Polyoxymethylen Polyacetal)
	Innenabmessungen	62 x 48 x 14 mm
	Außenabmessungen	73 x 53 x 16 mm
Verpackung	Primärbehälter	Spender aus widerstandsfähiger Pappe mit Öffnung an der Vorderseite zur einfachen Entnahme der Kassetten.
	Sekundärbehälter	Pappkarton
Lagerung	Lagerungsbedingungen	In Anbetracht des Produkttyps sind keine besonderen Aufbewahrungs- und Lagerungshinweise zu befolgen.
	Haltbarkeit	Das Produkt ist in Laufe der Zeit stabil.
	Haltbarkeit	Nicht zutreffend für diesen Produkttyp.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	Verwendungsweise	Nicht vorgesehen für diesen Produkttyp.
	Produktklassifizierung	Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Labor durch Fachpersonal bestimmt. Das Produkt ist unter dem chemischen Aspekt nicht als gefährlich eingestuft. Für diesen Produkttyp sind keine speziellen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen vorgesehen.
	Entsorgungshinweise	Gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
	Empfehlungen	Es wird empfohlen, im Falle eines schweren Unfalls sofort Bio-Optica Milano spa und die zuständigen Behörden zu informieren.

REVISION NR.	GRUND	REVISIONSDATUM
001	Anpassung an die EU-Verordnung 2017/746 - IVDR	16.05.2022

Veröffentlichungsdatum: 16/05/2022

Rev. 001