


# SZUPERMEGA FIÓKOK

Tároláshoz



KÓD	SZÍN	KISZERELÉS
07-7000	Fehér	200 db (3 adagoló: 2 db 100 fiókos és 1 db 200 fedeles)

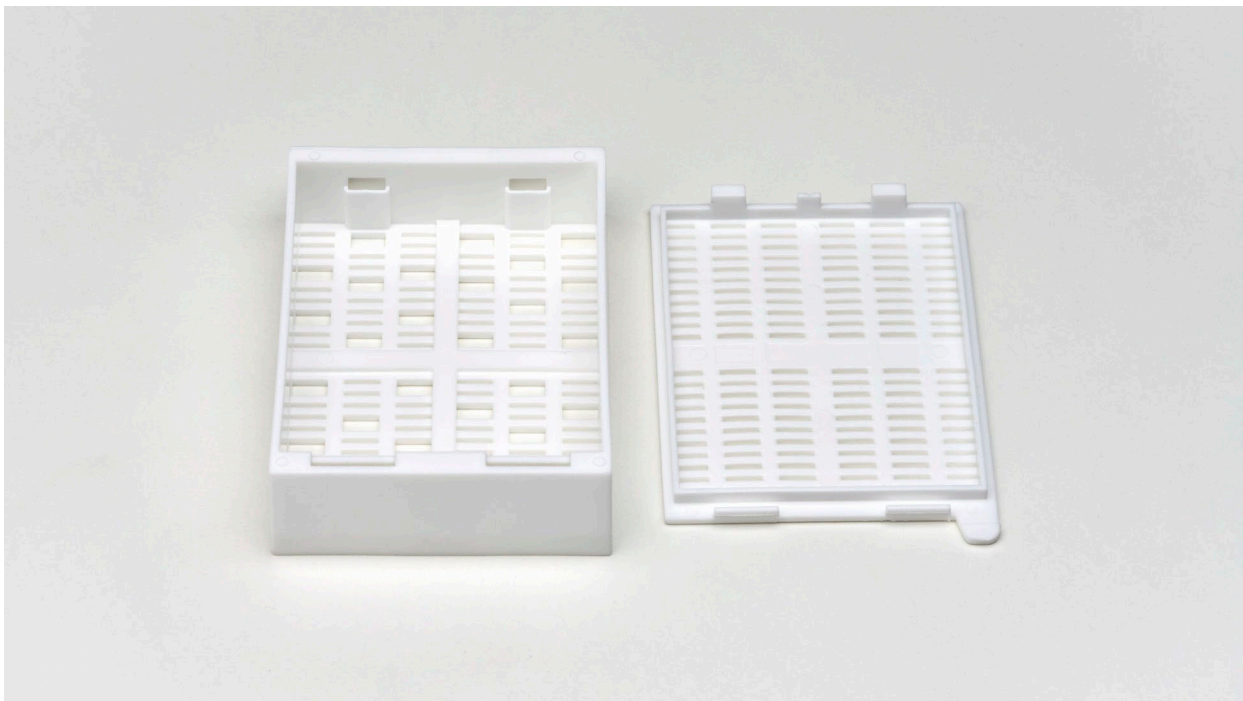

In vitro orvosi diagnosztikai eszköz  
IVD az A osztályban, Reg. EU 2017/746

Basic UDI: 080339762W05030501YL  
UDI-DI: 08033976235215



Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A.



Egyszer használatos termék

Közzététel napja: 16/05/2022  
Felülv. 001

Tárolófiókok makrometszetekhez.

### ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Fiókok szövettani makrometszetes minták tárolásához, kettős zárórendszerrel, amely tökéletes lezárást biztosít a feldolgozás során.

Anyaguk acetál gyanta: ez az anyag kiváló stabilitást biztosít magas hőmérsékleten, mikrohullámú kezelésekkel, oldószerekkel, savakkal és lúgokkal szemben; az anyag ezért optimális a paraffinos összetevők feldolgozásához és keveréséhez.

A tartalom azonosítását megkönnyítik a fiók három oldalán lévő durva felületek, amelyek ceruzával, szövettani tollal (kódszám: 11-50 vagy 11-400) történő feliratozásra alkalmasak.

A hagyományos makrometszetes fiókokhoz képest a Bio-Optica SuperMegaCassette fiókjainál néhány furat nagyobb méretű. Ez lehetővé teszi, hogy a paraffin a behelyezési fázis alatt jobban tapadjon, így elkerülhető a blokk véletlen törését a mikrotommal történő vágás során.

A SuperMegaCassette fiókok a legjobb műszaki tudásunk szerint készülnek, ezért – a termék összetettsége és a felhasznált anyag típusa miatt – természetesnek tekintendő 5,000 PPM-nek (milliomod rész) megfelelő mennyiségű selejt fiók, ami 0,5% -nak felel meg.

Ezen a mennyiségen belül nem fogadunk el reklamációt és/vagy garanciális csere igényt.

### Részletezés

Műszaki jellemzők	Vegyí összetétel	Acetál gyanta (polioximetilén-poliacetál).
	Belső méretek	62 x 48 x 14 mm
	Külső méretek	73 x 53 x 16 mm
Csomagolás	Elsődleges tárolóedény	Tartós kartonpapír adagoló elülső nyílással a fiókok egyszerű kivételéhez.
	Másodlagos tárolóedény	Kartondoboz
Tárolás	Tárolási körülmények	A terméktípusnak megfelelően nincs különösebb előírányzott megőrzési és tárolási mód.
	Stabilitás	A termék időtállóan stabilnak minősül.
	Érvényességi idő	Nem alkalmazható az ilyen terméktípusnál.
Figyelmeztetések és óvintézkedések	Felhasználási mód	Nem előírányzott az ilyen terméktípusnál.
	A termék besorolása	A termék egészségügyi szakemberek által történő, professzionális laboratóriumi használatra készült. A termék vegyi szempontból nem minősül veszélyesnek. Nincsenek különösebb figyelmeztetések és óvintézkedések ehhez a terméktípushoz.
	Hulladékba helyezés	Ártalmatlanítsa a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
	Ajánlások	Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.P.A. és az illetékes hatóságok azonnali tájékoztatása.

FELÜLVIZSGÁLATI SZ.	INDOKLÁS	FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONT
001	Megfelel az EU UE 2017/746 - IVDR jogszabálynak	2022.05.16.

Közzététel napja: 16/05/2022

Felülv. 001